

AXIOM

BACKS

CB | PB | PL | LB | DL

DA - BRUGERVEJLEDNING OG GARANTI



2026-05-22

DA - INDLEDNING

Tak fordi du har købt et Axiom produkt!



ADVARSEL: Brug ikke dette produkt uden at have læst hele brugsvejledningen først. Brug uden først at have læst hele brugsvejledningen kan medføre alvorlig tilskadekomst af brugeren og/eller assistenten.

Ki Mobility anbefaler, at lade en hjælpemiddelkonsulent eller en anden kompetent klinisk eller teknisk fagperson oplære dig i sikker brug af stolen, inden du tager den i brug.

Tøv ikke med at kontakte din autoriserede leverandør, en autoriseret repræsentant eller Ki Mobility, hvis du har spørgsmål eller tvivl til aspekter af denne kørestol, brugsvejledning eller leverede service. Ki Mobility kan kontaktes på:

(1)715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com
(Inkluderer søgning efter nærmeste forhandler og adgang til trykte oplysninger)

Eller gennem vores autoriserede EU-repræsentant:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



Eller gennem vores ansvarlige person i Storbritannien:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

INDHOLDSFORTEGNELSE

DA - INDLEDNING	1
INDHOLDSFORTEGNELSE	1
AXIOM RYGSTØTTE	1
Tilsluttet anvendelse	2
Din sikkerhed	2
Signalord	2
Forklaring af symboler	2
Kontroller din hud dagligt	3
Generelle advarsler	3
Mulighed for sæde med FIP-teknologi (Foam-In-Place)	3
Positioneringsseler eller bæltter	4

Beskyttelse af din Axiom rygstøtte ..	4
Orientering af betræk	5
Kontaktoverflader	5
Drejelig sidestøtte	5

OPSÆTNING, JUSTERING OG

PLEJE	5
Afmontning og genmontering af rygstøtten	5
Skub eller løft	7
Sikkerhed ved kørsel med Axiom rygstøtte	7
Vedligeholdelse	8
Rengøring	8
Desinfektion	9
Genmontering af Axiom-rygstøtten efter rengøring	9

KI MOBILITY BEGRÆNSET

GARANTI	10
I 24 måneder	10
I 6 måneder	10
Begrænsninger	10
Hvad gør vi	10
Hvad du skal gøre	10
Bemærkning til forbrugeren	10

AXIOM RYGSTØTTE

Axiom rygstøttetilbehør

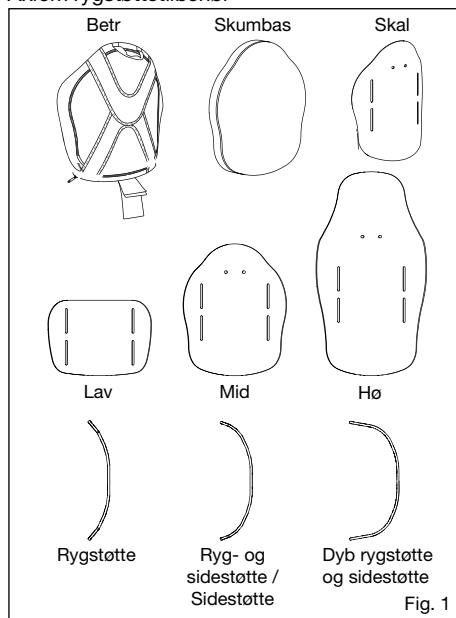


Fig. 1



MAKSIMAL BRUGERVÆGT: 136 kg (300 lbs) ved brug af DEX- og FXT-hardware, 181 kg (400 lbs) ved brug af BTX-hardware.

BEMÆRK: Axioms brugertilpassede rygstøtter varierer fra ordre til ordre og svarer muligvis ikke til illustrationen i fig. 1.

A. Tilsigtet anvendelse

Rygstøtterne til Ki Mobility-kørestole er skabt med henblik på at yde postural støtte, trykfordeling og forbedret siddekomfort. Denne rygstøtte til kørestol er designet til både indendørs eller udendørs brug.

B. Din sikkerhed

Enhver bivirkning eller skade i forbindelse med brugen af dit produkt eller dets tilbehør skal straks indberettes, hvis det direkte eller indirekte forårsager alvorlige helbredsproblemer eller død hos brugeren eller anden person. Indberet alle alvorlige tilfælde og/eller skader til Ki Mobility, og, hvis krævet i den lokale lovgivning, til den relevante sundhedsmyndighed, hvor brugeren og/eller anden person har fast ophold.

Brug ikke dette produkt uden at have læst hele brugsvejledningen først. FØR brug skal du oplæres i sikker brug af produktet af en hjælpemiddelkonsulent eller en anden kompetent sundhedsfaglig person eller tekniker. Ki Mobility fremstiller mange forskellige produkter, der passer til dine behov. Den anbefalede bedste praksis til valg af produkt er at konsultere en hjælpemiddelkonsulent eller anden kompetent teknisk fagperson og en erfaren klinisk fagperson, såsom en fysioterapeut, ergoterapeut eller læge. Det endelige valg af produkttype, tilbehør og justeringer er alene dit med assistance fra din tekniske og kliniske fagperson. Det ekstraudstyr, du vælger, og opsætningen og justeringen af produktet kan have direkte indflydelse på dets ydeevne, stabilitet og evne til at opfylde dine behov.

C. Signallord

I denne brugsvejledning finder du, hvad der henvises til som "Signallord". Disse ord bruges til at identificere og formidle alvoren af en række farer. Før du bruger denne stol, bør både du som bruger og alle, som hjælper dig, læse hele denne brugsvejledning. Bemærk signallordene, og tag alle oplysninger, forsigtighedsregler og advarsler i betragtning. Følg alle instruktioner, og brug stolen sikkert. Signallord henviser til en fare eller usikker praksis, der kan forårsage alvorlig tilskadekomst eller død for dig selv eller andre personer. "Advarslerne" er opdelt i følgende tre hovedkategorier:

BEMÆRK: Bemærk angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre nedsat ydeevne af stolen eller skade på din kørestol, hvis situationen ikke undgås.

⚠️ FORSIGTIG ⚠️

FORSIGTIG: Forsigtig angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i skade på din kørestol og dig selv, hvis situationen ikke undgås.

⚠️ ADVARSEL ⚠️

ADVARSEL: Advarsel angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere alvorlig tilskadekomst eller død, hvis situationen ikke undgås.

Disse signalord findes i hele brugsvejledningen, hvor det er relevant, for at gøre opmærksom på en farlig situation. Se afsnit F om farlige situationer, som er gældende for typisk brug af denne kørestol. ^{Table 1}

D. Forklaring af symboler

Forklaring af symboler

Symbol	Definition
	Angiver fabrikanten af det medicinske udstyr.
	Fremstillingsdato (ÅÅ/MM/DD).
	Hvis angivet på det medicinske udstyr eller emballagen, betyder det, at brugeren af sikkerhedshensyn skal konsultere anvisningerne som f.eks. forsigtighedsregler og advarsler.
	Angiver, at produktet er medicinsk udstyr.
	Angiver fabrikantens serienummer, så specifikt medicinsk udstyr kan identificeres.
	Angiver den autoriserede EU-repræsentant.
	Angiver fabrikantens erklæring om, at produktet opfylder kravene i den gældende EU-lovgivning.
	Angiver fabrikantens erklæring om, at produktet overholder kravene i de gældende UKCA-direktiver.
	Angiver fabrikantens batchkode, så batchen eller partiet kan identificeres.
	Angiver importøren af det medicinske udstyr til den pågældende lokalitet.
	Angiver, at brugeren skal konsultere brugsvejledningen.
	Angiver, at brugeren skal konsultere den angivne hjemmeside for at se brugsvejledningen i elektronisk format.
	Angiver en hjemmeside, hvor brugeren kan få yderligere oplysninger om det medicinske produkt.

Forklaring af symboler

Symbol	Definition
	Angiver en specifik maksimal vægtbegrænsning (kg/lbs).
	Angiver et transportsikringspunkt.
	Angiver et potentielt klemmepunkt.
	Maskinvask, varm
	Må ikke bleges
	Lufttør, eller brug tørretumbler uden varme.
	Må ikke stryges
	Må ikke renses

E. Kontroller din hud dagligt

Disse Axiom sidde- og positioneringsprodukter er designet til at forbedre trykfordelingen og øge siddekomforten. Det kan ikke sikres på forhånd, at den medfølgende pude opfylder dine særlige behov. Din huds tilstand kan blive påvirket af mange aspekter i dit daglige liv og medicinske tilstand, herunder brugen af dette produkt. Følg eventuelle hudplejekure, som din læge har ordineret.

Brugere af dette produkt bør lade deres hud kontrollere dagligt for ændringer. I tilfælde af ændringer skal du stoppe med at bruge produktet omgående og kontakte din læge. En vigtig klinisk indikator på vævsnedbrydning er hudrødmen. Ved hudrødmen bør du stoppe med at bruge produktet omgående og kontakte din læge. Vær især omhyggelig med at kontrollere områderne ved bækkenets knoglefremspring, såsom lårben og sædeben.

ADVARSEL

ADVARSEL: Forkert valg af Axiom rygstøtte til din kørestol kan påvirke din huds tilstand og resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

ADVARSEL

ADVARSEL: Undladelse af at kontrollere hud eller fortsat brug af en Axiom rygstøtte efter hudforandringer er indtruffet, kan påvirke din huds tilstand, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

F. Generelle advarsler

ADVARSEL

ADVARSEL: Brug eller monter ikke denne Axiom rygstøtte uden, at du har læst og forstået denne brugsvejledning først. Kontakt din autoriserede Ki Mobility-leverandør eller din læge, hvis du ikke forstår advarslerne og instruktionerne. Manglende overholdelse af dette, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

ADVARSEL

ADVARSEL: Montering af en Axiom rygstøtte på en kørestol kan påvirke kørestolens tyngdepunkt. Ændringer af tyngdepunkt kan påvirke din stabilitet, når du sidder i kørestolen. Det kan resultere i, at du vælter eller falder ud af kørestolen og kommer alvorligt til skade. Gennemgå altid brugsvejledningen til din kørestol for at se, om ændringer i kørestolen kan være nødvendige for at give tilstrækkelig stabilitet efter tilføjelse af en Axiom rygstøtte.

ADVARSEL

ADVARSEL: Huden kan påvirkes af mange aspekter i dit daglige liv og medicinske tilstande, herunder brugen af dette produkt. Følg eventuelle hudplejekure, som din læge har ordineret. Forbrugere af dette produkt bør sørge for, at deres hud kontrolleres rutinemæssigt for ændringer som anvist af deres læge. Manglende overholdelse af dette, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

G. Mulighed for sæde med FIP-teknologi (Foam-In-Place)

ADVARSEL

ADVARSEL: Misbrug af dette produkt kan forårsage skade på dig eller slutbrugeren. Du skal have læst, forstået og følge alle brugsvejledninger fra Seating Dynamics, fabrikanten af FIP, der fås med Axiom kundetilpassede rygstøtter.

FORSIGTIG

FORSIGTIG: Førstegangsbrugere af FIP-teknologien skal også overholde Seating Dynamics' krav til uddannelse, før de bruger FIP-teknologien. I modsat tilfælde kan du og din virksomhed blive holdt til ansvar.

Seating Dynamics kræver, at du:

1. ser Liquid SunMate® FIPS-træningsvideoen (tilgængelig online på <http://youtu.be/PQdZHufHhwo>)
2. læser brugsvejledningen (tilgængelig online på https://cdn.shopify.com/s/files/1/0206/0878/files/CSD7_FIPS_Instruction_Manual_Rev5_190313.pdf?3)
3. underskriver og sender en bekræftelseserklæring om gennemført uddannelse til Dynamic Systems (tilgængelig online på https://cdn.shopify.com/s/files/1/0206/0878/files/CS-R11_Verification_Statement.pdf?2240)

H. Positioneringsseler eller bæltter

ADVARSEL

ADVARSEL: Forkert brug af positioneringsseler kan medføre, at brugeren glider under positioneringsselen i kørestolen. Det kan forårsage brystkompression eller kvælning grundet tryk fra selen. Det kan hæmme brugerens vejtrækning og medføre alvorlig tilskadekomst eller død.

ADVARSEL

ADVARSEL: Forkert brug af positioneringsseler kan medføre at kropsdele vikles ind. Det kan begrænse bevægeligheden og resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

Ki Mobility anbefaler brugen af hofteeseler. Hofteeseler kan mindske risikoen for, at brugeren falder ud af kørestolen. Positioneringsseler som hofteeseler og seleveste er udviklet til at hjælpe med til, opretholde og støtte passende positionering og siddestilling i kørestolen.

- Kontrollér at brugeren ikke glider under positioneringsselen i kørestolens sæde.
- Positioneringsselen bør tilstrækkelig tæt til at holde positionen, men ikke så stramt at det hæmmer vejtrækningen. Der skal være plads til en åben hånd mellem bruger og sele.

- Passende brug af puder kan bidrage til bækkenstabilitet og reducere glidning.
- Brug ALDRIG positioneringsseler:
 - a. som fiksering. Med mindre du nemt kan fjerne selerne i et nødstilfælde, kan det betragtes som en fiksering. Brug af fiksering kræver lægeerklæring, så rådfør dig med din sundhedsperson om andre muligheder for hjælp i din position
 - b. ved en bruger som er bevidstløs eller ophidset
 - c. som fastholdelsesanordning på en bruger eller sikkerhedssele i et motorkøretøj. En positioneringsselse er ikke designet til at erstatte en sikkerhedssele som er fastgjort til køretøjets stel, som det kræves af en effektiv sikkerhedssele. Under et pludseligt stop vil brugeren blive slynget fremad med høj kraft. Dette kan kørestolsseler ikke forhindre, og yderligere skade kan ske fra seler eller stropper. Se afsnittet om transport i denne brugsvejledning for yderligere oplysninger.

I. Beskyttelse af din Axiom rygstøtte

Undgå at udsætte rygstøtten for ugunstige miljøforhold i længere tid. Dette kan inkludere overdreven udsættelse for sollys og temperaturer, enten varme eller kolde. Dette kan resultere i forringet ydelse af din Axiom rygstøtte.

ADVARSEL

ADVARSEL: Mangel på beskyttelse af din Axiom rygstøtte kan føre til ændringer, der kan påvirke din hudtilstand, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.


Selvom din Axiom rygstøtte er fremstillet i overensstemmelse med dens mærkede standarder for brændbarhed, bør du undgå at udsætte din pude for åben ild eller ekstreme varmekilder, såsom en brændende cigaret. Dette kan få din pude til at antænde eller udsende skadelige gasser.

ADVARSEL

ADVARSEL: Mangel på beskyttelse af din Axiom rygstøtte mod ekstrem varme kan få din Axiom rygstøtte til at antænde eller udsende skadelige gasser, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

J. Orientering af betræk

Din Axiom rygstøtte er designet til at vende i en bestemt retning, og den skal placeres korrekt i din kørestol med betrækket vendt korrekt med skumbasen. Betrækket er mærket for at angive den korrekte orientering. Se fig. 2.

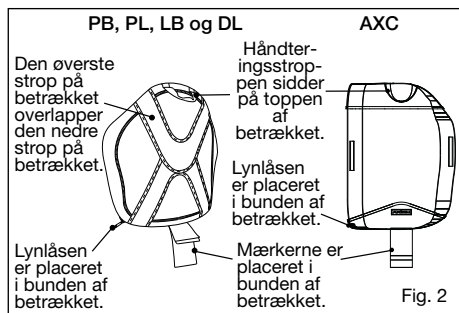

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis Axiom rygstøttestrøbe og betræk ikke vender korrekt, kan det påvirke din hudtilstand, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadecomst eller død.

Selvom din Axiom rygstøtte er fremstillet i overensstemmelse med dens mærkede standarder for brændbarhed, bør du undgå at udsætte din pude for åben ild eller ekstreme varmekilder, såsom en brændende cigaret. Dette kan få din pude til at antænde eller udsende skadelige gasser.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Mangel på beskyttelse af din Axiom rygstøtte mod ekstrem varme kan få din Axiom rygstøtte til at antænde eller udsende skadelige gasser, hvilket kan resultere i alvorlig tilskadecomst eller død.

K. Kontaktoverflader

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Håndtering af sædets overflade ved forhøjede temperaturer kan resultere i en potentiel farlig situation som, hvis den ikke undgås, kan forårsage tilskadecomst.

⚠ Udsæt ikke rygstøtten og komponenterne for ekstrem kulde. Ekstremt kolde metaloverflader kan resultere i at huden fryser fast på overfalden og medfører skade på huden.


Vær opmærksom på langvarig eksponering for direkte sollys eller andre kilder til varmestraler, som kan øge temperaturen på din kørestols overflader til højere end grænserne anbefalet i standarderne.

Pløjepersonalet bør kontrollere patienterne for uønskede hudreaktioner pga. de varme kontaktoverflader, f.eks. rødme, hævelse, irritation, sensibilisering, allergi, immunreaktion eller andet.

L. Drejelig sidestøtte

Brug


1. Tryk den røde knap ind på drejehængslet på siden. Drej sidestøtten til den ønskede placering.

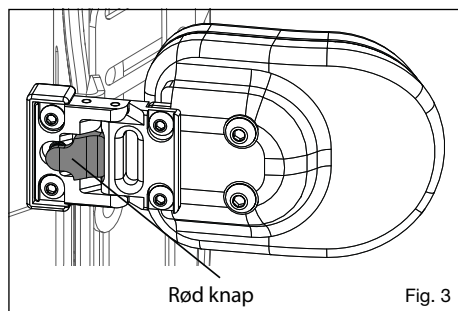

2. Drej sidestøtten tilbage til standardpositionen, og sørg for, at den "klikker" fast eller låses på plads.

Omnilink, justerbar og svingbar


- Skub den sølvfarvede stift op for at frigøre mekanismen, og sving sidehængslet væk. Drej sidestøtten til den ønskede placering.

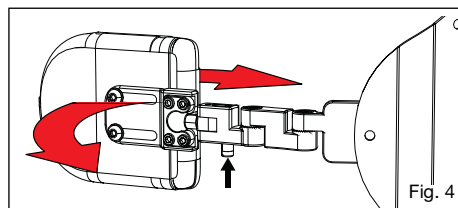

OPSÆTNING, JUSTERING OG PLEJE


A. Afmontering og genmontering af rygstøtten

Find den rigtige hardwaretype

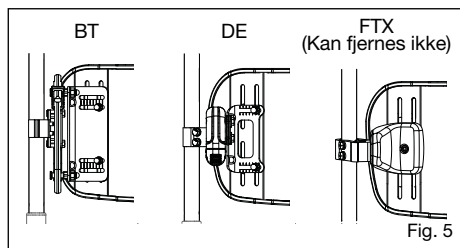


Afmontering af BTX


1. BTX - Fjern sikkerhedsstiften (fig. 6:A).

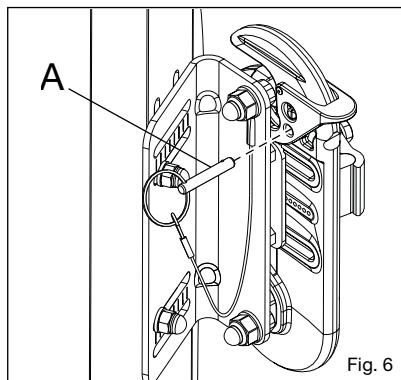

2. Bring låsemekanismen i udløsningsposition (fig. 7).

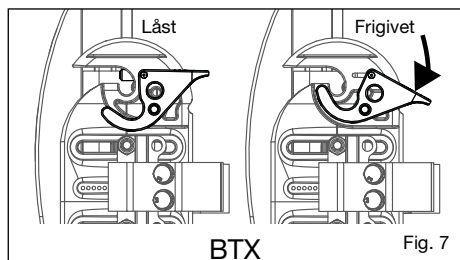


3. Træk frem, og fjern med den nederste slids, som kommer frem først. Se fig. 8.

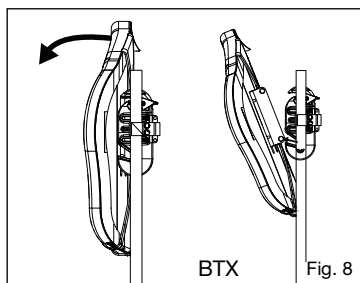


Genmontering af BTX

1. Genmontering af rygstøtten. Se fig. 9.

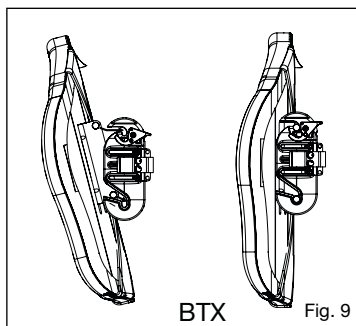


2. Fastgørelsestest: Kontroller visuelt, at låsen er låst (fig. 7). Træk op, og fremad for at kontrollere, at rygstøtten er fastgjort. Se fig. 10.

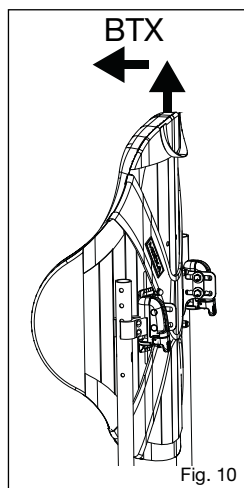

3. Udskift stiften til sikkerhedslåsen (fig. 6:A).


Afmontering af DEX

1. Bring låsemekanismen i udløsningsposition (fig. 11).

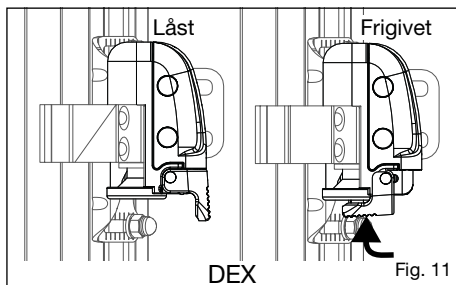


2. Fjern rygstøtten ved at trække op i strop-pen. Se fig. 12.

alvorlig tilskadekomst for brugeren eller andre.

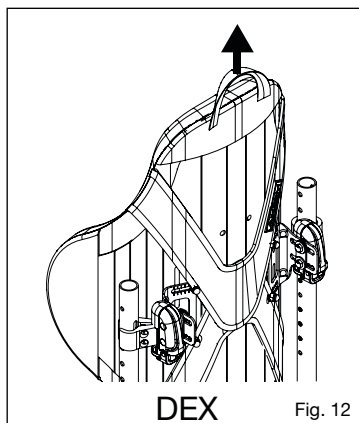

Genmontering af DEX

1. Genmontering af rygstøtten. Se fig. 13.

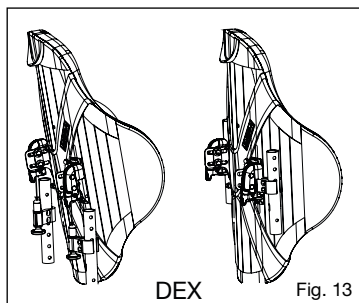

2. Fastgørelsestest: Kontroller visuelt, at låsen er låst (fig. 11). Træk op for at sikre, at rygstøtten er fastgjort. Se fig. 12.

B. Skub eller løft



ADVARSEL: Brug ikke Axiom-rygstøtten til at løfte eller skubbe kørestolen.

1. Brug ikke Axiom-rygstøtتهåndtaget til at løfte kørestolen. Det er kun beregnet til at fjerne Axiom rygstøtten.
2. At skubbe eller trække anses for forkert brug af Axiom rygstøtten og kan få Axiom rygstøtten til uventet at gå løs fra kørestolen. Manglende overholdelse af disse advarsler kan forårsage skade på din stol eller fald, at stolen vælter eller tab af kontrol, hvilket kan forårsage

C. Sikkerhed ved kørsel med Axiom rygstøtte

Axiom-rygstøtten er testet i henhold til de dynamiske testkrav i ANSI/RESNA WC-4, afsnit 20: Kørestolens sædesystemer til brug i motorkøretøjer eller ISO 16840-4 Kørestolssæder - Del 4: Sæder til brug i motorkøretøjer. Et komplet system med kørestolsramme, siddesystem, fastspændings- og sikkerhedssesystemer og et korrekt udstyret motorkøretøj, der lever op til de standarder, der nævnes i dette afsnit, bør være på plads, inden en Axiom rygstøtte anvendes i en kørestol, der benyttes som sæde i et motorkøretøj.



ADVARSEL: Undladelse af at følge alle instruktioner om installation, brug og vedligeholdelse i denne brugsvejledning samt transportinstruktionerne angivet nedenfor, kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død ved brug af Axiom rygstøtte i en kørestol, der bruges som sæde i et motorkøretøj.

1. Hvis det er muligt, skal passageren skifte til et sæde i køretøjet, der er originalt fra køretøjets fabrikant, og bruge køretøjets fastspændingsanordninger.
2. Afstanden mellem toppen af brugerens skulder og toppen af Axiom-rygstøtten bør ikke overstige 14 cm (5,5").
3. Kørestolen skal være mærket som egnet til brug som et sæde i et motorkøretøj, dynamisk testet i henhold til kravene i ISO-standard 7176-19 og monteret, brugt og vedligeholdt i henhold til fabrikantens instruktioner.
4. Hvis det originale kørestolssæde er blevet udskiftet, skal det nye sæde godkendes til kørestoltransport, monteres og bruges som angivet i fabrikantens instruktioner.
5. Når kørestolens bruges som sæde i et motorkøretøj, skal passageren være i en fremadvendt position.
6. Passageren skal bruge et fastspændings- og sikkerhedssystem til kørestole, der er i overensstemmelse med ANSI-RESNA WC-4, Del 18: Fastspændings- og sikkerhedssesystemer til kørestole og brugere (WTORS) til brug i motorkøretøjer eller ISO 10542-1 Tekni-

ske systemer og hjælpemidler til personer med handicap - Fastspændings- og sikkerhedsselesystemer til kørestole - Del 1: Krav og prøvningsmetoder til alle systemer - og den skal installeres, anvendes og vedligeholdes i henhold til producentens anvisninger.

7. Brug af hofte-, bryst-, skulderseler, ethvert andet positioneringssystem eller positioneringstilbehør bør ikke bruges som fastspænding af brugeren, medmindre det er mærket som sådan af fabrikanten i overensstemmelse med ANSI-RESNA WC-4, afsnit 18 eller ISO 10542-1, afsnit 1.
8. Brug af nakkestøtte, sidestøtter eller andet positioneringstilbehør bør ikke benyttes som fastspænding af brugeren, medmindre det er mærket som sådan af fabrikanten i overensstemmelse med RESNA WC-4, afsnit 18, eller ISO 10542-1, Del 1, eller ANSI/RESNA WC-4, afsnit 20: Sæder til brug i motorkøretøjer eller ISO 16840-4 Kørestolssæder -- Del 4: Sæder til brug i motorkøretøjer.
9. Ekstra tilbehør som borde, iltfaskeholdere, iltfasker, dropstativer, rygsække, poser og andre ting skal fjernes og sikres separat i motorkøretøjet. I tilfælde af en trafikulykke kan disse elementer udgøre farlige projektiler, som kan resultere i alvorlig tilskadekomst eller død for dig selv eller andre passagerer i motorkøretøjet.
10. Dette produkt er beregnet til brug af voksne med en vægt på mellem 36 og 136 kg (79 til 300 lbs).
11. Hvis Axiom-rygstøtten har været involveret i en ulykke, bør du ikke fortsætte med at bruge den, da den kan have skader, der muligvis ikke er synlige.

D. Vedligeholdelse

Regelmæssig rengøring og vedligeholdelse kan hjælpe med at forlænge levetiden på din Axiom rygstøtte. Du bør kontrollere din Axiom rygstøtte månedligt. Under rengøringen anbefales det at kontrollere komponenterne.

1. Kontrollér betrækket for flænger og en høj grad af slitage
 - a. Fjern betrækket, og kontrollér for defekter (indvendigt og udvendigt).
 - b. Kontrollér skummet for flade punkter eller nedbrydning.
 - i. Flænger dybere end 6,35 mm (0,25").
 - ii. Løse skumgranulater.

iii. Permanente ændringer i den ubelastede skumform, såsom udfladning.

2. Kontrollér, om hardwaren er løs eller udvider tegn på afskalning, forringelse eller deformiteter.

ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis der konstateres defekter såsom nedbrydning af skum eller beskadigelse af hardware eller fastgørelsesanordninger, skal produktet omgående tages ud af brug og din autoriserede Ki Mobility-leverandør kontaktes. Manglende overholdelse af dette, kan det resultere i alvorlig tilskadekomst eller død.

ADVARSEL

ADVARSEL: Ejeren af dette udstyr er ansvarlig for at sikre, at det er blevet samlet og justeret af en autoriseret Ki Mobility-leverandør under ledelse af en sundhedsperson. Det kan kræve periodiske sikkerheds- og funktionskontroller eller visse brugsjusteringer, der kan udføres af brugeren, plejepersonalet eller en autoriseret Ki Mobility-leverandør.

- **Fastgørelsesanordninger:** Ki Mobility anbefaler, at alle fastgørelsesanordninger, såsom løse bolte eller ødelagte komponenter, kontrolleres for korrekt funktion hver sjette måned. Løse fastgørelsesanordninger bør strammes i henhold til installationsanvisningerne.
- **Udskiftning af komponenter:** Kontakt din autoriserede Ki Mobility-leverandør straks en komponent skal udskiftes. Afbryd brugen af systemet efter identifikation af løse eller ødelagte komponenter.

ADVARSEL

ADVARSEL: Ved spild af ætsende væsker eller ved eksponering for biologiske farer skal de forurenende stoffer omgående fjernes, da de kan medføre alvorlig tilskadekomst eller død. Se vejledningen i afsnittet om rengøring i denne brugervejledning.

E. Rengøring

Axiom rygstøttebetræk


BEMÆRK: Tørring med varme kan forårsage krympning, der påvirker betrækkets pasform og funktion.

1. Fjern betrækket fra Axiom rygstøtten ved at løsne dets Velcro®-stropper. Luk lynlåsen op i bunden af betrækket.
2. Rul let, og fjern skummet for at vende betrækket om på vrangen.
3. Luk betrækket for at undgå, at det hænger fast i noget.
4. Maskinvask i varmt vand (60 °C).
5. Lufttør eller brug tørretumbler uden varme.

BEMÆRK: Rens ikke betræk, og brug ikke industrivaskemaskiner eller tørretumblere til at rengøre betræk. Må ikke bleges. Betydning af symboler for vaskepleje er vist i fig. 14.

Samling af Axiom rygstøtten

1. Fjern hele rygstøttemonteringen for at gøre rengøringen lettere. Se fig. 14.

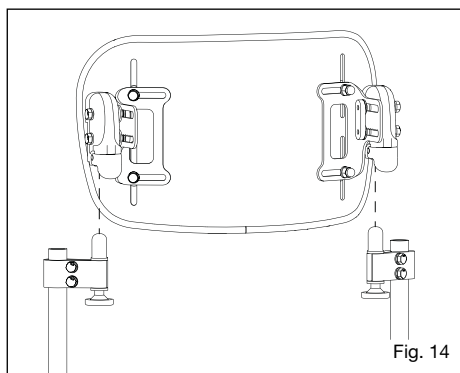

2. Skallen på Axiom-rygstøtten skal aftørres regelmæssigt med sæbe og vand for at forhindre ophobning af snavs.

Positioneringskomponenter

1. Positioneringskomponenter kan aftørres med sæbe og vand.
2. Nedsænk IKKE positioneringskomponenterne i vand.

Table 2

Pleje- og brugsanvisning	
	Maskinvask, varm
	Må ikke bleges
	Lufttør, eller brug tørretumbler uden varme
	Må ikke stryges
	Må ikke renses

F. Desinfektion

Desinfektion bør udføres ud over den regelmæssige rengøring:

1. Fjern, og vask betræk som beskrevet i trin 1a., 1b., og 1c. ovenfor.
2. Maskinvask betræk i varmt vand (60 °C).
3. Dryptør, og/eller brug tørretumbler uden varme.
4. Desinficer alle overflader (betræk, skum og rygstøttemontering) med desinfektionsmiddel til håndvask med mindst 70 % sprit eller afsprøjtningsservietter. Læg ikke i blød, og lad ikke rengøringsmidler blive siddende.
5. Lad desinfektionsmidlet virke på overfladen i mindst 15 minutter, og fjern med en antiseptisk klud, hvis nødvendigt.

G. Genmontering af Axiom-rygstøtten efter rengøring

- Efter rengøring
 - Genmonter skum og betræk. Rul betrækket forsigtigt over skummet, når du sætter betrækket på.
- Genmontering af rygstøtten
 - a. Axiom-rygstøtten genmonteres ved at sikre, at beslag på stol og rygstøtten klikker korrekt sammen. (Fig. 14)
 - b. Skub Axiom-rygstøtten på plads på beslagene.
 - c. Hvis de sættes korrekt i, vil stiftene "klikke" i en låst position.

ADVARSEL

ADVARSEL: Hvis du er i tvivl, om du har hørt låsen "klikke", skal du trække op i Axiom rygstøtten ved hjælp af håndtaget for at prøve og sikre, at den er forsvarligt låst. Hvis du ikke er opmærksom på denne advarsel, kan dit udstyr blive beskadiget, du kan falde eller du kan miste kontrollen, hvilket kan forårsage alvorlig tilskadekomst for dig eller andre.

KI MOBILITY BEGRÆNSET GARANTI

Forventet levetid for rammen er fem år.

A. I 24 måneder

Ki Mobility garanterer for materiale- og fabriktionsfejl på Axiom-rygstøtten i en periode på 24 måneder. Denne begrænsede garanti gælder for:

- Axiom-rygstøttens skal og skum

Hvis en materiale- eller fabriktionsfejl konstateres inden for en periode på 24 måneder (2 år) fra købsdatoen vil Ki Mobility efter eget skøn reparere eller udskifte den berørte del uden beregning, såfremt den har været anvendt som tilsigtet. Denne garanti gælder ikke for punkteringer, flænger eller brændemærker.

B. I 6 måneder

Ki Mobility garanterer for materiale- og fabriktionsfejl på Axiom rygstøtten i en periode på 6 måneder. Denne begrænsede garanti gælder for:

- Aftageligt betræk

Hvis en materiale- eller fabriktionsfejl konstateres inden for en periode på 6 måneder fra købsdatoen, vil Ki Mobility efter eget skøn reparere eller udskifte den berørte del uden beregning, såfremt den har været anvendt som tilsigtet. Denne garanti gælder ikke for punkteringer, flænger eller brændemærker.

C. Begrænsninger

1. Vi yder ingen garanti i tilfælde af:
 - a. Skader forårsaget af forsømmelse, ulykker, misbrug eller forkert montering eller reparation
 - b. Produkter modificeret uden Ki Mobilitys udtrykkelige skriftlige samtykke

c. Skader som følge af overskridning af vægtbegrænsningen.

2. Denne garanti er kun gældende for Nordamerika. Tal med din leverandør for at finde ud af, om internationale garantier er gældende.
3. Denne garanti kan ikke overdrages og gælder kun for den første brugers køb af dette produkt gennem en autoriseret Ki Mobility-leverandør.

D. Hvad gør vi

Vores ansvar er begrænsning til reparation eller udskiftning af dele, som er omfattet af garantien. Dette er den eneste erstatning mod følgeskader.

E. Hvad du skal gøre

1. Indhente vores forhåndsgodkendelse til returnering eller reparation af de dækkede dele, så længe garantien er gyldig.
2. Reklamationer og reparationer skal behandles gennem den nærmeste autoriserede leverandør. Med undtagelse af de udtrykkelige garantier, der er angivet heri, er alle øvrige garantier, herunder stiltiende garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, udelukket.

F. Bemærkning til forbrugeren

1. Hvis loven tillader det, erstatter denne garanti enhver anden garanti (skriftlig eller mundtlig, udtrykkelig eller stiltiende, herunder en garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål).
2. Denne garanti giver dig visse juridiske rettigheder. Du kan også have andre rettigheder, der varierer fra land til land.

Noter partiets lotnummer her til senere brug:

AXIOM

by Etac

+1 715-254-0991



Ki Mobility
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.

Eller gennem vores autoriserede EU-
repræsentant:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com

