



— Pelvic Positioning Supports —

EN - USER INSTRUCTION MANUAL AND WARRANTY
ES - MANUAL DE INSTRUCCIONES Y GARANTÍA



2026-06-19

INTRODUCTION

Thank you for purchasing a Ki Mobility product!



WARNING: Do not use this without first reading this entire manual. Use without first reading this entire manual could result in serious injury to the user and/or attendant.

Ki Mobility recommends training by an Assistive Technology Professional (ATP) or other competent clinical or technical professional in the safe use of this chair prior to use.

If you have any questions or concerns about any aspect of this wheelchair, this manual or the service provided, do not hesitate to contact your authorized supplier, an authorized representative or Ki Mobility. Ki Mobility can be reached at:

(1)715-254-0991



Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com
(Includes Dealer locator and access to printed information)

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	1
TABLE OF CONTENTS	1
PELVIC POSITIONING SUPPORT	1
Intended Use	1
Your Safety	1
Signal Words	1
Symbol Glossary	2
Check Your Skin Daily	2
General Warnings	2
Disposal	3
Re-Use	3
Storage	3
Maintenance	4
Cleaning	4
Sanitizing	4
Anti-Thrust Pelvic Support	4
KI MOBILITY LIMITED WARRANTY	6
For 12 Months	6
Limitations	6
What We Will Do	6
What You Must Do	6
Notice to Consumer	6
SOPORTE DE POSICIONAMIENTOS PÉLVICO	7

PELVIC POSITIONING SUPPORT

A. Intended Use

Ki Mobility Postural Support Devices are intended to provide postural support, positioning and improved sitting tolerance.

B. Your Safety

Any serious adverse events or injuries related to the use of this product, or its accessories must be reported immediately if the incident directly or indirectly leads to serious health decline or death of the user or other person. Report any serious events and/or injuries to Ki Mobility and, if required by local regulation, the competent health authority where the user and/or other person legally reside.

Ki Mobility manufactures many different products that might meet your needs. The recognized best practice for selecting a product is to consult with an ATP or other competent technical professional and an experienced clinical professional such as physical therapist, occupational therapist, or physician. Final selection of the type of product, options and adjustments rests solely with you and your technical and clinical professionals. The options you choose, and the set-up and adjustment of the product have a direct impact on its performance, stability and its ability to meet your needs.

C. Signal Words

Within this manual you will find what are referred to as "Signal" words. These words are used to identify and convey the severity of varying hazards. Before using this chair you, and each person who may assist you, should read this entire manual. Please note the Signal word and consider any notes, cautions or warnings. Make sure to follow all instructions and use your chair safely. The Signal word refers to a hazard or unsafe practice that may cause severe injury or death to you or to other persons. The "Warnings" are in three main categories, as follows:

NOTE: Note indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in a decline in the performance of the chair or damage to your wheelchair.



CAUTION: Caution indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in damage to your wheelchair and injury to you.

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: Warning indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in serious injury or death.

These signal words will be placed throughout the manual, where appropriate to highlight the hazardous situation. Refer to Section F. for hazardous situations that will apply to the general use of this postural support device.

D. Symbol Glossary

SYMBOL	DEFINITION
	Indicates the medical device manufacturer.
	Date of manufacture (YEAR/MM/DD).
	If presented on the medical device or packaging, it indicates the need for the user to consult the instructions for safety reasons such as cautions and warnings.
	Indicates the item is a medical device.
	Indicates the manufacturer's serial number so that a specific medical device can be identified.
	Indicates the need for the user to consult the instructions for use.
	Indicates the need for the user to consult the listed website for instructions for use in an electronic format.
	Indicates a website where a user may obtain additional information about the medical product.
	Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.
	Machine Wash, Hot
	Do Not Bleach
	Line dry or tumble, no heat
	Do Not Iron
	Do Not Dry Clean

E. Check Your Skin Daily

These Axiom Seating and Positioning products are designed to improve pressure distribution and increase sitting tolerance. Whether the cushion provided will meet your individual needs cannot be assured in advance. The integrity of your skin can be affected by many aspects of your daily life and medical condition,

including the use of this product. Be sure to follow any skin care regimens established by your clinician.

- Users of this product should make sure their skin is inspected daily for changes. If you see changes, discontinue the use of this product immediately and consult with your clinician. A key clinical indicator of tissue breakdown is skin redness. If your skin develops redness, discontinue the use of this product immediately and consult your clinician. Be especially careful to inspect the areas related to the bony prominences of the pelvis such as your trochanters and ischial tuberosities.

F. General Warnings

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: The postural support devices described in the user instruction manual were designed and are required to be fitted, installed, and adjusted for change exclusively by an Assistive Technology Professional (ATP) or other competent clinical or technical professional. A clinical assessment should be done in advance of use to ensure safe and correct use. Improper selection or use in serious injury.

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: Do not use this postural support device without first reading this entire manual. Use without first reading this entire manual could result in serious injury.

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: Any caregivers must consult with the user's health care professional to learn proper adjustment, safety, and support methods best suited to the specific user.

⚠️ WARNING ⚠️

WARNING: The installation of secondary supports on a wheelchair could affect the center of gravity of the wheelchair. Always review the instructions for use of your wheelchair to see and follow them to assure stability is not affected by the addition of any postural support devices. Changes in your center of gravity may affect your stability in your wheelchair, resulting in tipping over or falling from your wheelchair which may result in serious injury.

⚠ WARNING ⚠

WARNING: Depending on your skin and other conditions related to your disability you may develop irritations or abrasions from prolonged contact with or rubbing against the surfaces of your wheelchair. Irritation and abrasions can lead to further complications from skin breakdown which can be serious.

Ki mobility recommends wearing clothing or other protected coverings over skin that is resting or rubbing against components or the frame of your wheelchair. If you have skin breakdown or other tissue integrity issues you should discontinue use and seek advice from a clinical professional trained in skin care such as a doctor, nurse, or a therapist. Always follow the advice of the clinical professionals caring for your skin and wear recommended dressings and/or coverings to protect your skin.

⚠ WARNING ⚠

WARNING: Any body part that presses against a wheelchair frame or other wheelchair components, such as positioning devices, may create skin deformation that results in a high pressure point. High pressure points negatively affect the tissue under stress and can cause you to develop a pressure injury or skin breakdown. If your skin develops redness, or any other symptoms of a pressure injury or skin breakdown, discontinue the use of this product immediately and consult your clinician. Continuing to use the product after skin changes are present can result in serious injury or death.

⚠ WARNING ⚠

WARNING: Failure to protect your Axiom secondary support(s) from extreme heat may cause your Axiom Product to ignite or emit harmful gases, resulting in serious injury or death.

⚠ WARNING ⚠

WARNING: Your Axiom secondary support may contain small parts which can become disconnected or removed from the primary device and may pose a choking hazard, particularly to young children or individuals with cognitive impairments. Dispose of packaging and unused parts properly to prevent accidental ingestion or choking. Keep out of reach of children and vulnerable individuals and do not allow them handle or manipulate

the device unsupervised. Failure to do so may result in accidental ingestion or choking which can result in serious injury or death.

G. Disposal

Product is made of materials which can be disposed of safely without special precautions.

Specific waste disposal or recycling regulations may be in force locally and these should be taken into consideration when disposal arrangements are made. This may include the cleaning or de-contamination of the component before disposal.

If recycling of materials is a requirement, please refer to the following list of general materials (which may or may not be present based on product type.):

- Aluminum – bracketry, clasps, clamps, hardware
- Steel – Fasteners, adjustment rods, extension rods
- Plastic – plugs, clips
- Upholstery – Woven polyester fabric and polyurethane foam.

If recycling of materials is desired or a requirement, such as per Directive 2012/19/EU, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) in Europe, both REAC and Mascot are compliant to WEEE and provide guidance on recycling and disposal. Proper dismantling is necessary to achieve a high proportion of reuse or recycle. Care to use proper tools and protective measures in handling are required to avoid contact with sharp edges. Plastics marked with recycling symbols and thermoplastic parts can be recycled. Aluminum, copper, and steel parts, including fasteners, may be recycled. Cables, batteries, and PCB are to be disposed of separately per local requirements. Return your product and accessories to your authorized supplier for proper disposal if you are not comfortable or able to dispose of properly.

H. Re-Use

In general, complete disinfection cannot be guaranteed on seams. We recommend that you dispose of upholstered components such as headrest pads and sewn support systems to avoid micro-bacterial contamination with active agents according to your local infection protection law.

I. Storage

Products should be stored in a cool dry place with relatively low humidity (<75%) out of direct sunlight and excessive dust for long periods of time. Products should not be stored outside.

J. Maintenance



WARNING: If you find any abnormalities, such as the foam breaking down or damage to the hardware or fasteners, discontinue the use of this product immediately and consult with your Authorized Ki Mobility Supplier. Failure to do so can affect your positioning and stability resulting in the potential for serious injury.

Regular cleaning and maintenance may help extend the life of your Postural Support Device. You should inspect your product monthly and during regular cleaning.

1. Check Cover or Pad Fabric for Tears and Excessive Wear
 - a. Remove removable covers and check for abnormalities (inside and out).
 - b. Inspect the cover externally of pads with non-removable covers.
 - c. Check the foam, gel or other padding for breakdown or degradation.
 - Tears deeper than 0.25" (6.35 mm)
 - Loose granules of foam
2. Check the hardware for any looseness, signs of stripping, bending or cracking. Loose fasteners should be tightened to ensure product is securely in place. Consult your authorized dealer if the issue continues or if you have questions on appropriate retightening.
3. If you find the fasteners or other hardware components are damaged and cannot be tightened, you should contact your Authorized Ki Mobility Supplier immediately to replace them and discontinue use of the product.
4. If you find bent, cracked or otherwise damaged, such as corrosion, hardware components you should contact your Authorized Ki Mobility Supplier immediately to replace them and discontinue use of the product.

K. Cleaning

- Positioning Components
 - a. Positioning components can be wiped clean with soap and water.
 - b. DO NOT immerse positioning components underwater.


L. Sanitizing

Sanitizing step should be done in addition to regular cleaning:

1. Remove and launder cover according to steps 1a., 1b. and 1c. above.
2. Machine wash cover only in hot water (60°).
3. Drip and tumble dry on No Heat.
4. Disinfect all surfaces (cover, foam and back assembly) with over-the-counter disinfecting sanitizer of at least 70% alcohol or wipes. Do not soak or allow pooling of disinfectant solutions.
5. Allow sanitizer to remain on surface for at least 15 minutes and remove with aseptic cloth if necessary.

M. Anti-Thrust Pelvic Support

Product Identification:

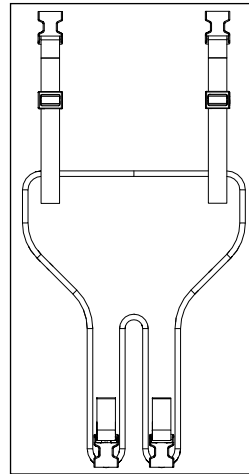

WARNING: Ensure restraint release mechanisms will not be activated by wheelchair components during a crash. Activation of restraint release mechanisms during a crash may result in serious injury or death.



Use of headrests, lateral supports or other positioning accessories should not be used, or relied on as an occupant restraint. These belts should be positioned so that they don't interfere with the proper positioning of crash-worthy belt restraints and should not be relied on for occupant protection in crash situations unless the postural belt has been designed to

comply with, and perform to, requirements 4.6, 5.2, 5.3 and 6.1 of RESNA WC-4.



This secondary support is NOT intended as an occupant restraint in a moving vehicle. This component is for positioning use only and should not be relied upon as a transit safety restraint.



Improper use of positioning belts and secondary supports can cause the user to slide underneath the positioning belt in the wheeled product. If this should happen, chest compression or suffocation due to pressure from the belt can occur. If this occurs, the user's breathing may be hampered causing serious injury or death.

Improper use of secondary positioning supports could cause body parts to become entangled which can restrict mobility and movement, which could result in serious injury or death. Secondary positioning supports can reduce the risk of falling from your wheeled product. Secondary positioning supports such as positioning belts, pelvic positioning belts and anterior trunk supports and straps, are designed to assist, retain and support proper positioning and posture in the wheeled product.

- Ensure the user does not slide underneath the secondary positioning support.
- The secondary positioning supports should have a snug fit; tight enough to hold their position, but not so tight as to restrict breathing. An open hand should be able to fit between the belt and the user.
- Proper use of cushions can contribute to pelvic stability and reduce sliding.
- NEVER use secondary positioning supports and positioning belts:
 - a. As a restraint, unless you can remove the belt easily in an emergency, then it may be considered a restraint. A restraint requires a doctor's order, consult with your health care advisor for other options to help you with your posture.
 - b. On a user who is unconscious or agitated.
 - c. As an occupant restraint or safety belt in a motor vehicle. A positioning belt or support is not designed to replace a vehicle or wheelchair mount occupant restraint. During a sudden stop, with the force of the stop, the user would be thrown forward. Depending on the force, this

may cause the positioning belt or support to fail.

Use Instructions:



WARNING: Use of this postural secondary support without assuring stable pelvic positioning can result in the user sliding down or otherwise repositioning relative to the support and creating a choking hazard or other airway obstruction which could result in serious injury or death.



Improper positioning of the support could become a choking hazard or other airway obstruction which could result in serious injury or death.



Never use an anterior trunk support without appropriately installed pelvic positioning device(s) that assures pelvic stability. Failure to do so can result in slipping or repositioning which could result in serious injury or death.




Never leave a user unattended during use of positioning support who is cognitively impaired or unable to free themselves from the device. Doing so could result in unintended repositioning, creating a choking hazard or other airway obstruction which could result in serious injury or death.

To be able to mount this Anti-Thrust Pelvic Support you must have a wheelchair with a solid backrest and installed pelvic positioning belt. Both wheelchair back and pelvic positioning belt must have been fit and installed by an authorized Ki Mobility supplier.

1. Fitting and installation is done with the client in the product.
2. Ensure pelvic positioning belt is installed according to manufacturer's instructions with the oversight of the clinical professional.
3. Place Anti-Thrust Support onto seat surface with wide end facing the wheelchair backrest.
 - Webbing straps are routed through the mount plates per diagram below.
4. Rear Strap placement and mounting:
 - a. For Planar Solid Back Cushion Attachment:
 - Attach rear straps to an appropriate location at or near the bottom rear corners of a Solid Back Support using supplied mounting plates and fasteners

- b. For Axiom Back or similar attachment:
 - Anchor plates are attached to the back shell using provided ¼-20 fasteners and nyloc nuts in predrilled holes in the back shell.
- c. Rear Straps should be adjusted to place the rear edge of the support at or slightly behind the rear edge of the wheelchair seat surface.
5. Front strap placement and mounting:
 - a. Wrap front straps around bottom of backrest without obstructing other devices on wheelchair.
 - b. Attach front straps to the bottom rear corners of the backrest, slightly above the rear strap location.
6. Webbing straps can be adjusted at the point of attachment as well as at the side release buckle closure.

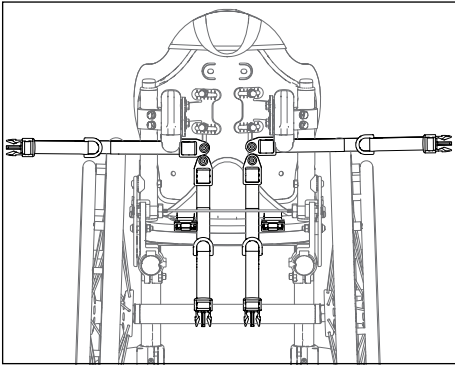

7. Ensure system were safely installed by checking:
 - a. Buckles and straps are holding the support component in the desired clinically advised position.
 - b. User is sitting comfortably and in a way that reflects their normal seat posture without any part of the component obstructing airways, neck or head movement.

⚠ WARNING ⚠

WARNING: Failure to read and heed these instructions could result in serious injury or death.

KI MOBILITY LIMITED WARRANTY

The expected life of the product is 5 years.

A. For 12 Months

Ki Mobility warrants the Axiom Anti-Thrust Pelvic Support to be free from defects in materials and workmanship for a period of 12 months. This limited warranty applies to:

- Material and foam

For a period of 12 months (1 years) from the date of purchase, provided normal use, should a defect in materials or workmanship occur, Ki Mobility will, at its option, repair or replace it without charge. This warranty does not apply to punctures, tears, or burns or buckle breakage due to misuse or abuse.

B. Limitations

1. We do not warrant:
 - a. Damage from neglect, accident, misuse, or from improper installation or repair.
 - b. Products modified without Ki Mobility's express written consent.
2. This warranty applies in North America only. Check with your supplier to find out if international warranties apply.
3. This warranty is not transferable and only applies to the first consumer purchase of this product through an authorized Ki Mobility supplier.

C. What We Will Do

Our sole liability is to repair or replace covered parts. This is the exclusive remedy for consequential damages.

D. What You Must Do

1. Obtain from us, while this warranty is in effect, prior approval for return or repair of covered parts.
2. Claims and repairs should be processed through the nearest authorized supplier. Except for express warranties made herein, all other warranties, including implied warranties of merchantability and warranties of fitness for a particular purpose are excluded.

E. Notice to Consumer

1. If allowed by law, this warranty is in place of any other warranty (written or oral, express or implied, including a warranty of merchantability, or fitness for a particular purpose).
2. This warranty gives you certain legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

ES - INTRODUCCIÓN

Gracias por comprar un producto Ki Mobility!



ADVERTENCIA: No use el producto sin antes leer por entero el presente manual. Sin leer el presente manual podría utilizarlo en un modo que provoque graves daños al usuario y/o a su cuidador.

Ki Mobility recomienda preparese con un Profesional de Tecnologías Asistivas (ATP) u otro especialista clínico o técnico competente en el uso seguro de este producto antes de iniciar su empleo.

Ante cualquier consulta o inquietud sobre cualquier característica de este producto, de este manual o del servicio que brindamos no dude en ponerse en contacto con su proveedor autorizado, con un representante autorizado o con Ki Mobility:



(1)715-254-0991
Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com
(Incluye localizador de distribuidores oficiales y acceso a información impresa)

CONTENIDO

ES - INTRODUCCIÓN	7
CONTENIDO	7
Uso Previsto	7
Su Seguridad	7
Palabras de aviso	7
Glosario de símbolos	8
Controle su piel a diario	8
Advertencias generales	8
Eliminación	9
Reutilización	10
Almacenamiento	10
Manutención	10
Limpieza	10
Desinfección	10
Soportes para el tronco anterior	11
GARANTÍA	13
Durante 12 meses	13
Limitaciones	13
Acciones de Ki Mobility	13
Acciones del consumidor	13
Aviso al consumidor	13

SOPORTE DE POSICIONAMIENTO PÉLVICO

A. Uso Previsto

Los dispositivos de soporte postural de Ki Mobility están pensados para brindar sostén a la postura, al posicionamiento y mejorar la tolerancia del usuario al estar sentado.

B. Su Seguridad

Todo incidente grave o lesión relacionados con el uso de este producto o con sus accesorios debe informarse de inmediato si dicho incidente ha conducido, directa o indirectamente, a un deterioro de salud grave o la muerte del usuario o de otra persona. Informe cualquier evento grave y/o lesión a Ki Mobility y, si así lo exige la normativa local, a la autoridad sanitaria competente donde reside legalmente el usuario y/u otra persona.

Ki Mobility produce una amplia gama de productos que pueden responder a sus necesidades. El mejor método comprobado para elegir su producto es consultar a un profesional de tecnologías asistivas u otro especialista técnico competente, y a un profesional clínico experto como un fisioterapeuta, un terapeuta ocupacional o un médico. La elección definitiva del tipo de producto, sus opciones de configuración y su regulación están exclusivamente a cargo suyo y de sus profesionales técnicos y clínicos. Los opcionales que elija, la configuración y la regulación del producto influyen directamente sobre su rendimiento, estabilidad y capacidad de satisfacer sus necesidades específicas.

C. Palabras de aviso

En este manual encontrará palabras que se denominan de "aviso" y se utilizan para identificar y transmitir la gravedad de diversos riesgos. Antes de poner en uso este producto usted y toda persona que pueda ayudarle deben leer este manual por entero. Preste atención a estas palabras de aviso y tenga en cuenta toda nota, precaución o advertencia. Asegúrese de seguir todas las instrucciones y use su producto de manera segura. La palabra de aviso se refiere a un peligro o una práctica no segura que puede causar lesiones graves o la muerte a usted u otras personas. Las "advertencias" son de tres categorías principales:

NOTA: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría provocar una disminución en el rendimiento del producto o causar daños al mismo.

⚠ PRECAUCIÓN ⚠

PRECAUCIÓN: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionarle daños a su producto y lesiones a usted.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría dar como resultado la muerte o lesiones graves.

Hallará palabras de aviso a lo largo de todo el manual, donde sea apropiado para resaltar la situación de peligro.

D. Glosario de símbolos

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	Indica al fabricante del dispositivo médico.
	Fecha de fabricación (YEAR/MM/DD).
	Indica la necesidad de que el usuario consulte una instrucción por motivos de seguridad, tales como precauciones y advertencias. Si se presenta en el dispositivo médico o en su empaque, indica la necesidad de que el usuario consulte las indicaciones por motivos de seguridad, tales como precauciones y advertencias.
	Indica que el artículo es un dispositivo médico.
	Indica el número de serie del fabricante de modo que se pueda identificar un dispositivo médico específico.
	Indica la necesidad de que el usuario consulte las indicaciones de uso.
	Indica la necesidad de que el usuario consulte el sitio web indicado a fin de obtener instrucciones de uso en formato electrónico.
	Indica un sitio web donde los usuarios pueden obtener información adicional sobre el producto médico.
	Indica el número de lote del fabricante de modo que se pueden identificar la partida o el lote.
	Lavado en máquina, Caliente
	No usar blanqueadores
	Seque en tendedero o en secadora sin calor.
	No planchar

SÍMBOLO	DEFINICIÓN
	No lavar a seco

E. Controle su piel a diario

Los dispositivos de soporte postural Axiom están diseñados para brindar posicionamiento, una mejor estabilidad y mayor tolerancia a la posición sentada. No se puede garantizar de antemano si el producto entregado satisfará sus necesidades individuales. La integridad de su piel puede verse afectada por varios aspectos de su vida cotidiana y su condición médica, incluyendo el uso de este producto. Asegúrese de seguir los regímenes de cuidado de la piel establecidos por su médico.

- Los usuarios de este producto deben asegurarse de que su piel sea inspeccionada a diario a fin de detectar cambios. En caso de detectarlos interrumpa el uso de inmediato y consulte a su médico. Un indicador clínico clave del deterioro del tejido es el enrojecimiento de la piel – si esto sucede interrumpa el uso del producto de inmediato y consulte a su médico. Preste especial atención a las áreas que recubren las prominencias óseas de la pelvis, tales como los trocánteros y las tuberidades isquiales.

F. Advertencias generales

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Los dispositivos de soporte postural descritos en el manual de instrucciones para el usuario fueron proyectados, y requieren regulación, instalación y ajuste de cambios exclusivamente por parte de un Profesional de Tecnologías Asistivas (ATP) u otro especialista clínico o técnico competente. Es necesaria una evaluación clínica antes del uso para garantizar que éste sea seguro y correcto.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: No utilice este dispositivo de soporte postural sin primero leer por entero el presente manual, de lo contrario podrían originarse graves daños.

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Los cuidadores deben consultar al especialista en salud del usuario para informarse sobre la correcta regulación

y seguridad y aprender los métodos de sostén más adecuados y específicos para el usuario.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Instalar soportes secundarios en una silla de ruedas puede afectar el centro de gravedad de la misma. Siga en todo caso las instrucciones de uso de su silla de ruedas para comprobar que el agregado de dispositivos de soporte postural no afecte la estabilidad. Los cambios en el centro de gravedad del usuario pueden incidir sobre su estabilidad en la silla de ruedas y provocar vuelcos o caídas de la misma, y por consiguiente graves daños.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Según su tipo de piel y otros cuadros relacionados con su discapacidad es posible que desarrolle irritación o abrasión por contacto prolongado, o roce, contra las superficies de su silla de ruedas. La irritación y la abrasión pueden conducir a otras complicaciones de deterioro de tejidos que pueden ser graves.

Ki Mobility recomienda usar ropa u otros elementos protectivos sobre la piel que se apoya o roza contra los componentes del chasis de la silla de ruedas. Si presenta deterioro de la piel u otros problemas de integridad tisular debe interrumpir el uso y consultar un especialista clínico en cuidado de la piel, como un médico, un enfermero o terapeuta. Siga siempre los consejos de los profesionales de la salud que se ocupan de su piel y póngase ropa y/o protecciones que la reparen.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Cualquier parte del cuerpo comprimida contra el chasis de una silla de ruedas u otras partes de la misma, tales como los dispositivos de posicionamiento, pueden originar deformación tisular que genere un punto de alta presión. Los puntos de alta presión impactan sobre el tejido bajo estrés y pueden desarrollar lesiones por presión o rotura de la piel. Si su piel presenta enrojecimiento o cualquier otro síntoma de lesión por presión o rotura de la piel interrumpa de inmediato el uso de este producto y consulte un médico. No hacerlo, y continuar usando el producto luego de dichos cambios en la piel puede generar graves daños o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: No proteger su soporte (o soportes) secundarios Axiom contra el calor extremo puede hacer prender fuego su producto Axiom o emitir gases dañinos que pueden ocasionar grave daño o la muerte.

ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: Su soporte secundario Axiom puede contener componentes pequeños que, desprendiéndose o siendo quitados del dispositivo primario, pueden representar un riesgo de asfixia especialmente para niños o personas con déficit cognitivo. Deseche correctamente el empaque y todo componente que no se use para prevenir la ingestión accidental y asfixia. Mantenga fuera del alcance de los niños y de individuos vulnerables - no les permita tocar o manipular este dispositivo sin supervisión. Ello podría provocar ingestión accidental o asfixia que pueden causar graves daños o la muerte.

G. Eliminación

Este producto está compuesto por materiales que pueden eliminarse de manera segura y sin precauciones particulares.

En su localidad pueden regir normas específicas para desechos o para reciclado que deben obedecerse cuando se organiza la eliminación de un producto. Por ejemplo puede ser obligatorio limpiar o descontaminar el dispositivo antes de desecharlo.

Si se requiere el reciclado de los materiales tenga en cuenta la siguiente lista genérica de materiales (que pueden estar presentes o no, según el tipo de producto):

- Aluminio –grampas, ganchos, abrazaderas, hardware
- Acero – varillas de ajuste y de extensión
- Plástico –tapones, ganchos
- Revestimiento - Tela de poliéster tratado y espuma poliuretánica.

Si se desea o se debe reciclar los materiales, como por ejemplo según la Directiva 2012/19/EU, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) en Europa, ya sea REAC que Mascot son conformes a WEEE y dan las líneas guía para reciclar y desechar. Es necesario desmantelar el producto para lograr un porcentaje alto de reutilización o reciclado. Preste atención a usar las herramientas correctas y aplique medidas de protección al manipular el producto para no tocar bordes filosos. Los plásticos marcados con símbolos de reciclado, y las piezas termo-

plásticas, pueden reciclarse. El aluminio, el cobre y las piezas de acero, incluso sujetadores, pueden reciclarse también. Los cables, baterías y PCB deben desecharse por separado según los requisitos locales. Si no se siente seguro o si no puede eliminar el producto y sus accesorios correctamente, regrelos a su distribuidor oficial para que lo haga.

H. Reutilización

En general no es posible garantizar la desinfección completa en las costuras. Recomendamos eliminar las piezas con revestimiento, como las almohadillas apoyacabezas y los sistemas posturales con costuras, para evitar la contaminación microbacteriana con agentes activos, según las leyes locales de protección contra las infecciones.

I. Almacenamiento

Los productos deben guardarse en un lugar fresco y seco con humedad relativamente baja (<75%) sin exposición a la luz solar directa y al polvo por períodos prolongados. No deben dejarse almacenados al aire libre.

J. Manutención



ADVERTENCIA: Si detecta cualquier anomalía como descomposición de la espuma o daños en el hardware o en los sujetadores, interrumpa de inmediato el uso de este producto y contacte a su distribuidor oficial Ki Mobility. No hacerlo puede afectar su posicionamiento y su estabilidad generando potenciales daños graves.

La limpieza y la manutención periódicas pueden ayudar a prolongar la vida de su dispositivo de soporte postural. Controle su producto una vez por mes y cada vez que lo limpia de manera regular.

1. Revise la tela de la cubierta o del acolchado en busca de desgarros y desgaste excesivo.
 - a. Quite las fundas extraíbles y observe si hay anomalías (por dentro y por fuera).
 - b. Inspeccione la funda externa de las almohadillas cuyas fundas no son lavables.
 - c. Controle que la espuma, el gel u otros rellenos no estén rotos o degradados.
 - Rasgaduras con más de 0,25" de profundidad (6,35 mm)
 - Gránulos de espuma sueltos.

2. Controle que el hardware no tenga piezas flojas o se vea pelado, plegado o quebrado. Los sujetadores flojos deben ajustarse para garantizar que el producto esté firme en su lugar. Consulte al distribuidor oficial si el problema continúa o si no sabe cómo volverlo a ajustar como corresponde.
3. Si nota que los sujetadores u otros componentes del hardware están dañados y no pueden ajustarse contacte de inmediato al distribuidor oficial Ki Mobility para que los reemplace, e interrumpa el uso del producto.
4. Si nota componentes del hardware plegados, quebrados o con otros daños debe contactar de inmediato al distribuidor oficial Ki Mobility para que los reemplace.

K. Limpieza

- Componentes de posicionamiento
 - a. Los componentes de posicionamiento pueden limpiarse con un trapo, agua y jabón.
 - b. NO sumerja los componentes de posicionamiento en agua.


L. Desinfección

La desinfección debe efectuarse además de la limpieza periódica:

1. Extraiga y lave la funda siguiendo los pasos 1a., 1b. y 1c. anteriores.
2. Lave la funda solo en lavarropas con agua caliente (60°C).
3. Escurra y centrifugue pero sin calor.
4. Desinfecte todas las superficies (funda, espuma y el conjunto del espaldar) con un higienizante de venta libre con al menos 70% de alcohol o con toallitas. No las empape ni las deje a remojo con las soluciones de limpieza.
5. Permita que el higienizante actúe sobre la superficie por un mínimo de 15 minutos y luego quítelo con un paño aséptico si es necesario.

M. Soportes para el tronco anterior

Identificación del producto:

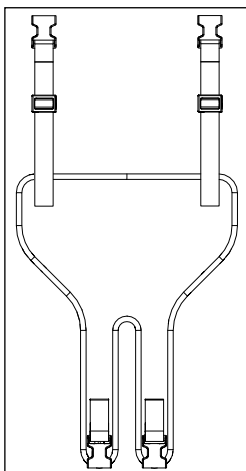

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Asegurarse que los mecanismos de liberación de la retención no sean activados por los componentes de la silla de ruedas durante un choque. La activación de los mecanismos de liberación de la retención durante un choque puede dar como resultado graves daños o la muerte.



Apoyacabezas, soportes laterales u otros accesorios de posicionamiento no deben usarse ni debe valerse de ellos como retención del ocupante. Colocar dichos cinturones de tal manera que no interfieran con el correcto posicionamiento de retenciones de cinturón anti-impacto, y no valerse de ellos como protección del ocupante en eventos de choque, salvo que el cinturón postural haya sido diseñado en conformidad con los requisitos 4.6, 5.2, 5.3 y 6.1 de RESNA WC-4.



Este soporte secundario NO está pensado como retención del ocupante de un vehículo en movimiento. Este componente es sólo para uso de posicionamiento y no para avalarse como cintura de seguridad para el tránsito.



El uso incorrecto de los cinturones de posicionamiento y los soportes secundarios pueden provocar que el usuario se deslice por debajo de dichos cinturones cuando está sentado en un dispositivo con ruedas. En tal caso podría originarse

compresión torácica o sofocación por la presión del cinturón con consiguiente obstaculización de la respiración del usuario que puede llevar a graves daños o muerte.

El uso incorrecto de los soportes secundarios pueden provocar que algunas partes del cuerpo queden atrapadas viéndose restringidas la movilidad y los movimientos, lo cual puede llevar a graves daños o muerte. Los soportes de posicionamiento secundarios pueden reducir el riesgo que el usuario se caiga del dispositivo con ruedas. Dichos soportes, como los cinturones de posicionamiento, los cinturones de posicionamiento pélvicos y los soportes y bandas para el tronco anterior están diseñados para ayudar, retener y sostener el correcto posicionamiento y la postura sobre el dispositivo con ruedas.

- Asegúrese que el usuario no se deslice por debajo del soporte de posicionamiento secundario.
- Los soportes de posicionamiento secundarios deben tener un calce firme; suficientemente ajustados para mantener la posición pero no tanto para obstaculizar la respiración. Debe poder pasar una mano abierta entre el cinturón y el usuario.
- El uso adecuado de los cojines puede contribuir a la estabilidad pélvica y reducir el deslizamiento.
- NUNCA use soportes de posicionamiento secundarios:
 - a. Como contención. Si no es posible quitar el cinturón con facilidad en una emergencia, entonces puede considerarse una contención. Las contenciones requieren orden médica. Su asesor de cuidados medicos podrá darle otras opciones para ayudarlo con su postura.
 - b. En un usuario inconsciente o agitado.
 - c. Como retención del ocupante o cinturón de seguridad en un vehículo a motor. Un cinturón o Soporte de posicionamiento no está diseñado para reemplazar una retención para el ocupante montada en el vehículo o en la silla de ruedas. Durante una frenada repentina la fuerza cinética lanzaría el usuario hacia adelante y, según la intensidad de la fuerza, puede fallar el cinturón o soporte de posicionamiento

Instrucciones de uso:

⚠ ADVERTENCIA ⚠

ADVERTENCIA: Emplear este soporte postural secundario sin asegurar una posición pélvica estable puede provocar que el usuario se deslice hacia abajo o cambie de posición con respecto al soporte. Esto puede crear un riesgo de sofocación u otra obstrucción de las vías respiratorias que pueden conducir a grave daño o muerte.



El incorrecto posicionamiento del soporte puede representar un riesgo de sofocación u otra obstrucción de las vías respiratorias que pueden conducir a grave daño o muerte.



Nunca emplee un soporte del tronco anterior sin haber instalado correctamente uno o más dispositivos de posicionamiento pélvicos que garanticen la estabilidad pélvica. En caso contrario el usuario se puede deslizar o cambiar de posición lo cual puede dar como resultado grave daño o muerte.




Nunca abandone, con un soporte de posicionamiento puesto, a un usuario con bajas capacidades cognitivas o que no es capaz de quitarse con sus propios medios el dispositivo. Hacerlo puede causar un cambio de posición involuntario que origine un riesgo de sofocación u otra obstrucción de las vías respiratorias que lleven a grave daño

Para poder Soporte de posicionamiento pélvico hacia delante, debe tener una silla de ruedas con un espaldar rígido y un cinturón de posicionamiento pélvico instalado. Tanto el espaldar de la silla de ruedas como el cinturón de posicionamiento pélvico deben haber sido ajustados e instalados por un proveedor autorizado de Ki Mobility.

1. La instalación y el ajuste se realizan con el usuario sentado sobre el producto.
2. Asegurarse que esté instalado un cinturón de posicionamiento pélvico de acuerdo con las instrucciones del fabricante y la supervisión del profesional clínico.
3. Coloque el soporte de posicionamiento pélvico hacia adelante sobre la superficie del asiento con el extremo ancho orientado hacia el espaldar de la silla de ruedas.

- Las correas de cincha se pasan por las placas de montaje según el diagrama siguiente.
4. Colocación y montaje de las correas posteriores:
 - a. Para la fijación a un soporte de espaldar rígido plano:
 - Fije las correas posteriores en una ubicación adecuada, en las esquinas posteriores inferiores de un soporte de espaldar rígido o cerca de ellas, utilizando las placas de montaje y las sujeciones suministradas
 - b. Para Axiom Back o un accesorio similar:
 - Las placas de anclaje se fijan a la carcasa del espaldar mediante las sujeciones de ¼-20 y las tuercas autofrenantes de nailon suministradas, en los orificios previamente perforados de la carcasa del espaldar.
 - c. Las correas posteriores deben ajustarse para colocar el borde posterior del soporte en el borde posterior de la superficie del asiento de la silla de ruedas o ligeramente detrás de él.
 5. Colocación y montaje de las correas delanteras:
 - a. Cruce las correas delanteras alrededor de la parte inferior del espaldar sin obstruir otros dispositivos de la silla de ruedas.
 - b. Fije las correas delanteras en las esquinas traseras inferiores del espaldar, ligeramente por encima de la ubicación de la ubicación de la correa posterior.
 6. Las correas de cincha pueden ajustarse tanto en el punto de sujeción como en el cierre de hebilla de liberación lateral.

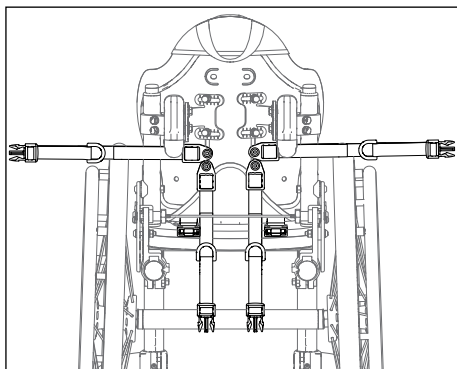

7. Cerciorarse que los sistemas estén colocados de manera segura controlando:
 - a. Que las hebillas y las bandas estén sujetando el componente de soporte en la posición clínicamente sugerida y deseada.
 - b. Que el usuario esté cómodamente sentado de tal forma que refleje su posición normal sin que ningún componente obstruya las vías respiratorias o el movimiento del cuello o de la cabeza.



ADVERTENCIA

ADVERTENCIA: No leer y acatar estas instrucciones puede ocasionar graves daños o muerte.

GARANTÍA

La vida estimada del producto es de 5 años.

A. Durante 12 meses

Ki Mobility garantiza el Soporte de pélvico antideslizamiento hacia delante Axiom contra defectos de materiales y mano de obra por un período de 12 meses. Esta garantía limitada se aplica a:

- Materiales y espuma

Durante un período de 12 meses (1 años) a partir de la fecha de compra, siempre que se utilice normalmente, en caso de que se produzca un defecto en los materiales o la mano de obra, Ki Mobility, a su discreción lo reparará o reemplazará sin cargo alguno. Esta garantía no cubre pinchaduras, rasgaduras o quemaduras o fractura de la hebilla debido a un mal uso o maltrato.

B. Limitaciones

1. Ki Mobility no garantiza:
 - a. Daños producidos por negligencia, mal uso o instalación o reparación inadecuadas.
 - b. Productos modificados sin el consentimiento expreso por escrito de Ki Mobility.
2. Esta garantía es aplicable sólo en América del norte. Infórmese con su proveedor si tienen garantías de alcance internacional.
3. Esta garantía no es transferible y solo se aplica a la compra de este producto por parte de su primer consumidor a través de un proveedor autorizado de Ki Mobility.

C. Acciones de Ki Mobility

La única responsabilidad de Ki Mobility es reparar o reemplazar las piezas cubiertas por garantía. Esta es la reparación exclusiva para los daños consecuentes.

D. Acciones del consumidor

1. Obtener de Ki Mobility, durante el período de vigencia de la garantía, una aprobación previa para la devolución o reparación de las piezas cubiertas por garantía.
2. Todo reclamo o reparación debe procesarse a través del proveedor autorizado más cercano. Excepto por las garantías explícitas indicadas aquí, quedan excluidas todas las demás garantías, incluyendo aquellas implícitas de comerciabilidad e idoneidad para un objetivo determinado.

E. Aviso al consumidor

1. Si lo permite la ley, esta garantía sustituye cualquier otra garantía (escrita o verbal, explícita o implícita, incluso una garantía de comerciabilidad o de idoneidad para un objetivo determinado).
2. Esta garantía confiere al consumidor ciertos derechos legales. Es posible que tenga también otros derechos que varían de estado a estado.

AXIOM

by Etac



Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.

(1) 715-254-0991



www.kimobility.com
(Includes Dealer locator and access to printed
information)