


ROGUE DT

NO - BRUKERHÅNDBOK OG GARANTI



Additional User
Instruction Languages

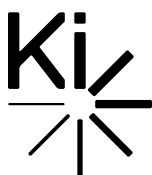

NO - INTRODUKSJON

Takk for at du kjøpte et Ki Mobility-produkt!



ADVARSEL: Ikke bruk det før du har lest hele denne bruksanvisningen først. Bruk uten å lese hele håndboken først kan føre til alvorlig personskade på bruker og/eller ledsager.

Ki Mobility anbefaler opplæring av en ergoterapeut, spesialist i hjelpemidler eller annen kompetent klinisk eller teknisk ressurs i trygg bruk av denne stolen før du kjører i den.

Hvis du har noen spørsmål eller bekymringer om noen sider av denne rullestolen, denne håndboken eller servicen som gis, ikke nøl med å kontakte din autoriserte leverandør, en autorisert representant eller Ki Mobility. Du kan få tak i Ki Mobility på:



(1)715-254-0991
Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
USA



www.kimobility.com
(Inkluderer forhandlerfinner og tilgang til trykt informasjon)

Eller via vår autoriserte EU-representant:



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



Eller via vår ansvarlige i StorbritanniaUK:



Etac Ltd
Unit 60, Hartlebury Trading
Estate, Hartlebury
Kidderminster, DY10 4JD

INNHold

NO - INTRODUKSJON.....	1
INNHold	1
MERKNAD – LES FØR BRUK	1
Bruksområde.....	1
Indikasjoner for bruk	1
Sikkerheten din	1
Signalord	2
Identifikasjon av serienummer	2
Symbolordliste	2
Generelle advarsler og forsiktighetsregler	3
Posisjoneringsbelter eller -seler	5
Kjøre i rullestolen.....	6
Hjelpemotor.....	7
Rullestolen din og miljøet	8
Modifikasjoner av rullestolen.....	8

Rullestolens stabilitet	8
Seter fra en tredjepart	9
BRUK OG KONFIGURASJON AV	
RULLESTOL.....	9
Fortauskanter, trinn og trapper	9
Forflytning	9
Bruk i transport	10
Bruk av puter.....	12
Transport av en rullestol uten bruker ..	12
Rogue DT og delene den består av	12
Høydejusterbart T-armlene	13
Svingbare armlener	13
Drivhjulene	14
Justering av fotstøtten	14
Vinkeljusterbar fotstøtte	14
Vinkeljusterbar oppfellbar fotstøtte som vippes inn under.....	15
Hybrid Vinkeljusterbar fotstøtte	15
Hjullåser	15
Navlåser	16
Tippsikringer	18
Polstring og tøy	21
Setetrekk	21
Ryggstøtte.....	21
Stokk- og krykkeholder	22
Trinnrør.....	23
VEDLIKEHOLD OG PLEIE.....	23
Tabell vedlikehold	23
Rengjøring	25
Oppbevaring	26
Kassering	26
FEILSØKING	26
Symptomer og løsninger.....	26
GARANTI.....	27
SPESIFIKASJONER	28

MERKNAD – LES FØR BRUK

A. Bruksområde

Ki Mobility manuelle rullestoler er manuelt drevne enheter med hjul som er tenkt å av medisinske grunner gi mobilitet til personer som er begrenset til en sittende stilling.

B. Indikasjoner for bruk

Ki Mobility manuelle rullestoler manuelt betjent enhet med hjul som er ment å gi bevegelighet til voksne begrenset til en sittestilling.

C. Sikkerheten din

MERK: Kontakt Ki Mobility for informasjon om tilbakekallinger og merknader om sikkerhet. Alle alvorlige hendelser eller personskader som er knyttet til bruken av rullestolen eller dens tilbehør må øyeblikke-

lig rapporteres, hvis hendelsen direkte eller indirekte fører til alvorlig redusert helse eller dødsfall for brukeren eller en annen person. Rapportert alle alvorlige hendelser og/eller skader til Ki Mobility og, slik det kreves av lokale forskrifter, til kompetente helsemyndigheter der brukeren og/eller andre personer er juridisk hjemmehørende.

Ikke bruk denne rullestolen uten at du først leser hele denne håndboken. FØR du kjører, må du få opplæring i trygg bruk av denne stolen av en profesjonell på hjelpemiddelsentralen eller andre kompetente klinikere eller teknikere. Ki Mobility produserer mange forskjellige rullestoler som kan oppfylle dine behov. Den beste anerkjente praksisen for å velge en rullestol er å snakke med hjelpemiddelsentralen eller annen kompetent tekniker og erfarne klinikere slik som fysioterapeut, ergoterapeut eller lege. Endelig valg av type rullestol, alternativer og justeringer er fullt ut ditt valg og dine tekniske og kliniske rådgivere. Alternativene du velger og konfigureringen og justeringen av rullestolen har en direkte innvirkning på stolens ytelse, stabilitet og hvor godt den oppfyller behovene dine. Faktorer som bør vurderes og som påvirker sikkerhet og stabilitet, er:

1. Dine personlige evner og kapasitet, inkludert styrke, balanse og koordinasjon.
2. Typene av farer og hindringer som du kan møte i løpet av dagen.
3. De spesifikke dimensjonene, alternativene og konfigurasjonen. Spesielt, setehøyden, setedybden, setevinkel, ryggvinkel, størrelse og stilling på drivhjulene og størrelse og stilling på svinghjulene.

D. Signalord

I denne håndboken vil du finne det som kalles «signalord». Disse ordene brukes for å identifisere og formidle alvorlighetsgraden av forskjellige farer. Før du bruker denne stolen bør du og alle personer som kan måtte assistere deg, lese hele denne håndboken. Merk deg signalordene og ta hensyn til alle merknader, forsiktighetsregler eller advarsler. Pass på at du følger alle bruksanvisninger og bruker stolen på en trygg måte. Signalordene viser til en fare eller en usikker praksis som kan forårsake alvorlig personskade eller dødsfall, for deg eller andre personer. «Advarslene» kommer i tre hovedkategorier, som følger:

MERK: Merk viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i en redusert ytelse fra stolen eller skade på rullestolen, dersom den ikke avverges.

⚠ VÆR FORSIKTIG ⚠

VÆR FORSIKTIG: Vær forsiktig viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i skader på rullestolen og personskafe for deg selv, dersom den ikke avverges.


⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Advarsel viser til en potensielt farlig situasjon som kan resultere i alvorlig personskafe eller dødsfall, dersom den ikke avverges.

Disse signalordene vil bli finnes gjennom hele håndboken, der det er riktig å markere den farlige situasjonen. Se avsnitt G. for farlige situasjoner som vil gjelde for generell bruk av denne rullestolen.

E. Identifikasjon av serienummer

UDI avbildet er et representativt utvalg. For informasjon som er spesifikk for ditt produkt, kan du sjekke UDI-etiketten på produktet ditt som angitt i figur under.

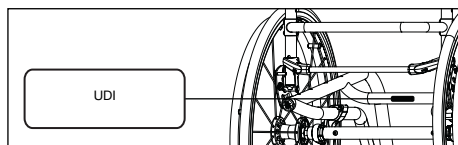

F. Symbolordliste

Symbol	Definisjon
	Angir produsenten av det medisinske utstyret.
	Produksjonsdato (YEAR/MM/DD).
	Hvis det står på det medisinske utstyret eller emballasjen, opplyser det om at brukeren må se bruksanvisningen av sikkerhetsårsaker slik som forsiktighetsregler eller advarsler.
	Angir type medisinsk utstyr.
	Angir produsentens katalognummer for identifisering av det medisinske utstyret.
	Angir autorisert representant i det europeiske fellesskapet.
	Angir produsentens erklæring om at produktet oppfyller kravene i de anvendbare EU-direktivene.
	Opplyser om at brukeren må se bruksanvisningen.
	Opplyser om at brukeren må se den elektroniske bruksanvisningen som er tilgjengelig på de angitte nettsidene.

Symbol	Definisjon
	Indikerer et nettsted der en bruker kan finne ytterligere informasjon om det medisinske utstyret.
	Indikerer en spesifisert maksimal vektgrense (pund/kg).
	Indikerer et festepunkt for overflytting.
	Indikerer ikke for transittbruk.
	Indikerer et punkt med klemfare.
	Angir organisasjonen som importerer det medisinske utstyret inn i regionen.
	Samsvarer med ANSI/RESNA WC-4 avsnitt 19 (WC19).
	Geeft de verklaring van de fabrikant aan dat het product voldoet aan de eisen van de toepasselijke UKCA-richtlijnen.

G. Generelle advarsler og forsiktighetsregler

ADVARSEL

		Standard	Transport
	Rogue DT	136 kg (300 pund)	136 kg (300 pund)

ADVARSEL: Grenser gjelder den kombinerte vekten i kilo av brukeren og alle gjenstander som bæres. Stolens vektgrense må ikke overskrides. En overskridelse av vektgrensen kan skade stolen, eller det kan øke faren for at du faller eller velter. En velt eller et fall kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke bruk stolen for vekktrening. Bevegelsen av den ekstra vekten endrer stolens tyngdepunkt og øker faren for at du velter. Hvis rullestolen velter, kan det føre til skade på stolen eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke heng ryggsekker, sekk eller tunge gjenstander over brukerens tyngdepunkt. Den ekstra vekten endrer stolens tyngdepunkt og øker faren for velt. En velt kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall. Hvis det skal fraktes ekstra last, anbefales det å bruke holdere og poser under setet. Gjenstander som henges på stolen, kan forårsake ustabilitet, kan hindre tilgang til stolkomponentene, bli viklet inn i bevegelige

deler, eller kan føre til for rask slitasje på stolkomponenter som setetrekk og skyvehåndtak.



Hold dekkene pumpet til riktig lufttrykk. Hvis du bruker en stol uten at dekkene er fylt som de skal, kan det påvirke stabiliteten og øke faren for at du velter. Hvis rullestolen velter, kan det føre til skade på stolen eller til alvorlig personskade eller dødsfall for deg eller andre. Det riktige lufttrykket står på dekkets sidevegg. Rullestoll-everandøren kan fastslå om dekkene er oppblåsbare, hvis du er usikker.



Unngå ramper eller skråninger med mer enn 9 graders helling. Bratte skråninger øker faren for at du faller eller velter. Et velt eller et fall kan føre til skade på stolen eller til alvorlig personskade eller dødsfall for deg eller andre. Ikke bruk stolen på ramper eller skråninger med mer enn ni graders helling (omkring 16 cm stigning/fall per meter), verken opp/ned eller sidelengs.



Unngå skrå flater som er glatte eller dekket med is, olje eller vann. Glatte skråninger kan føre til at du mister kontrollen over rullestolen på overflaten og føre til at du velter eller faller. Et velt eller et fall kan føre til skade på stolen eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Unngå å lene deg over siden eller ryggen på rullestolen for å nå noe. Å lene seg ut av stolen kan endre tyngdepunktet og føre til en ustabil situasjon som fører til at du faller eller velter. Et velt eller et fall kan føre til skade på stolen eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke løft rullestolen etter avtakbare deler når noen sitter i den. Å løfte rullestolen etter avtakbare deler mens noen sitter i den kan føre til at brukeren faller eller mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på stolen eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Innpakningsmaterialer må holdes utenfor barns rekkevidde. Feil håndtering av innpakningsmaterialer og uaktsomhet i pliktene til å holde barn under oppsyn kan føre til kvelning og alvorlig personskade eller dødsfall.



Rullestolen din oppfyller ISO 7176-16 for brennbarhet. Motstand mot antenning kan bli endret gjennom bruk, aldring eller rengjøring. Ta forholdsregler for å unngå tennkilder

eller opphold i nærheten av et brennbart materiale som kan øke tenningen, slik som oksygen og alkohol. Vær også oppmerksom på at montering av komponenter, seter, holdningsstøtter eller materialer på stolen kan endre brennbarheten. Endringer i brennbarheten kan medføre alvorlig personskade eller dødsfall.




I tilfelle det søles syrer eller du eksponeres for biologisk farlig materiale, fjern forurensningen umiddelbart. Se avsnittet Rengjøring i denne håndboken for instruksjoner.



Alle kroppsdeler som trykker mot rammen på en rullestol eller andre rullestolkomponenter, kan skape en huddeformering som fører til et tryktpunkt. Trykkpunkter påvirker vevet som stresses negativt og kan føre til at du utvikler en trykkskade eller et trykksår i huden. Hvis huden blir rød eller det oppstår andre symptomer på trykkskader eller trykksår, avslutt bruken av dette produktet umiddelbart og snakk med legen/terapeuten din. Hvis du fortsetter å bruke rullestolen etter at det har oppstått endringer i huden, kan det føre til alvorlig personskade eller død.




For å få trygg og sikker løfting av rullestolen uten bruker, anbefales det å slå ned ryggstøtten (om konfigurasjonen tillater det) og gripe tak i punktene på rammen som er angitt på illustrasjon. Pass på at du ikke griper tak i punkter der komponentene kan fjernes eller flyttes under bruk av stolen, for å unngå skade og komponentsvikt.

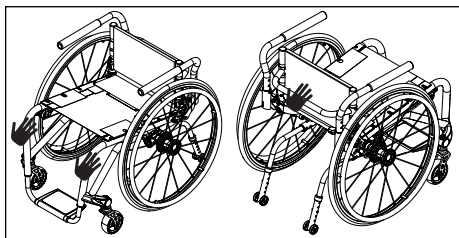

Totalte dimensjoner på rullestoler varierer i henhold til den spesifikke konfigurasjonen, for eksempel setedybde, setebredde, hjul- og dekkvalg og tillegg av ettermarkedsutstyr som ikke leveres av Ki Mobility. Hvis den totale dimensjonen på den spesifikke rullestolen din overskrider de anbefalte dimensjonene i bildet under, kan det begrense tilgangen til

rømmings-veier. Manglende tilgang til en rømmingsvei kan føre til alvorlig persons-kade eller død.

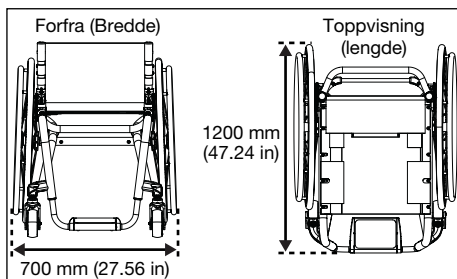

⚠ VÆR FORSIKTIG ⚠

VÆR FORSIKTIG: Unngå å stramme bolter og deler som fester komponenter til rammen alt for mye. For hard stramming kan gi skader på stolen og påvirke dens holdbarhet og ytelse. Skade på stolen kan føre til skade på brukeren.

MERK: Informasjon om stramming av fester finner du i vedlikeholdsavsnittet i denne håndboken. Hvis du er usikker på hvordan du skal stramme bolter eller fester på riktig måte eller mangler de nødvendige verktøyene, snakk med din autoriserte leverandør.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Bruk av benstøtte uten støttende føttøy som sko kan føre til alvorlig skade på føttene.

Ki Mobility kan leveres med flere benstøttealternativer. Justerbarheten varierer, og de er konstruert for å gi riktig støtte og plassering av føttene dine. De er ment å brukes med støttende føttøy som sko. Generelt vil fotplatene være mindre enn føttene dine, og vil ikke beskytte føttene mot skade hvis de støter mot vegger, dører eller andre harde flater som du kan komme borti mens du bruker rullestolen. Overflatene kan ha tekstur eller belegg som skal hindre at foten din glir av. Noen har slisser for å gjøre det enklere å feste andre typer fotstøtter. Noen har slisser for å gjøre det enklere å feste andre typer fotstøtter. Disse teksturbeleggene eller festepunktene er ikke konstruert for kontakt med nakne føtter og kan gi hudavskrapninger eller tryktpunkt som påvirker vevintegriteten. Sekundære støtter som fotputer eller fotkasse kan legges til hvis du ikke bruker skikkelig støttende føttøy som sko. Hvis du er usikker på om benstøttene er riktige deg, bør du snakke med en terapeut eller annen kompetent tekniker og en erfaren helsearbeider som en

fysioterapeut, ergoterapeut eller lege for å finne ut hva slags benstøtte som passer deg best. Hvis du har skadet hud eller andre problemer med vevsintegritet skal du avslutte bruken og søke råd hos en helsearbeider med opplæring i hudpleie som en lege, en sykepleier eller en terapeut. Følg alltid rådene fra helsearbeidere som tar vare på huden din og bruk de anbefalte bandasjene og/eller tildekkingene for å beskytte huden din.

ADVARSEL

ADVARSEL: Bruk av amputasjonsstøtte uten riktig tildekking kan føre til alvorlig skade på stumpen(e).

Hvis du har gjennomgått en amputasjon eller har misdannelser i beina kan rullestolen din ha blitt utstyrt med én eller to amputasjonsstøtter. Amputasjonsstøtter er konstruert for å brukes med riktig tildekkede stumper. De kan med hensikt være kortere enn amputasjonsstumpen(e) dine, og vil ikke beskytte stumpen mot skade hvis de støter mot vegger, dører eller andre harde flater som du kan komme borti mens du bruker rullestolen. Amputasjonsstumper kan få problemer med vevintegriteten fra trykk og gnissing. Du bør alltid bruke riktig tildekking av amputasjonstumpen(e) for å redusere denne faren. Hvis du har skadet hud eller andre problemer med vevsintegritet skal du avslutte bruken og søke råd hos en helsearbeider med opplæring i hudpleie som en lege, en sykepleier eller en terapeut. Følg alltid rådene fra helsearbeidere som tar vare på huden din og bruk de anbefalte bandasjene og/eller tildekkingene for å beskytte huden din.

ADVARSEL

ADVARSEL: Avhengig av huden din eller andre forhold i tilknytning til funksjonsnivået ditt, kan du utvikle irritasjon eller skrubbsår fra langvarig kontakt med eller gnissing mot overflater på rullestolen. Irritasjon og skrubbsår kan føre til ytterligere komplikasjoner hvis huden brytes ned og kan være alvorlig.

Ki Mobility anbefaler at du bruker klær eller annen beskyttende tildekking over hud som hviler mot eller gnisser mot komponenter på eller rammen på rullestolen din. Hvis du har skadet hud eller andre problemer med vevsintegritet skal du avslutte bruken og søke råd hos en helsearbeider med opplæring i hudpleie som en lege, en sykepleier eller en terapeut. Følg alltid rådene fra helsearbeidere som tar vare på huden din og bruk de anbefalte bandasjene og/eller tildekkingene for å beskytte huden din.

H. Posisjoneringsbelter eller -seler.

ADVARSEL

ADVARSEL: Feil bruk av posisjoneringsbelter kan føre til at brukeren sklir under posisjoneringsbeltet i rullestolen. Hvis det skulle skje, kan det oppstå kompresjon eller kvelning på grunn av trykk fra beltet. Hvis dette skjer, kan rullestolbrukeren pust bli hindret og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.



Feil bruk av posisjoneringsbelter kan føre til at kroppsdeler blir hengende fast, noe som kan begrense bevegeligheten og bevegelser. Det kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Ki Mobility anbefaler at det brukes hoftebelter for posisjonering. Hoftebelter for posisjonering kan redusere faren for å falle ut av rullestolen. Posisjoneringsbelter som hoftebelter og seler og stropper foran overkroppen er konstruert for å bistå, holde på og støtte riktig posisjonering og sittestilling i rullestolen.

- Sørg for at brukeren ikke sklir under posisjoneringsbeltet i rullestolsetet.
- Posisjoneringsbeltet må sitte godt, stramt nok til at posisjonen holdes, men ikke så stramt at det hindrer pusten. Det skal være mulig å få en åpen hånd mellom beltet og brukeren.
- Riktig bruk av puter kan bidra til hofteabilitet og redusere sklifaren.
- Bruk ALDRI posisjoneringsbelter
 - a. som tvang – tvangsmidler har egne regler.
 - Med mindre du lett kan fjerne beltene i et nødstilfelle. Hvis det ikke er mulig, snakk med rådgivende helsepersonell om andre muligheter for å hjelpe deg med sittestillingen
 - b. På en bruker som er bevisstløs eller opphisset.
 - c. Som sikring eller sikkerhetsbelte i et motorkjøretøy. Et posisjoneringsbelte er ikke konstruert for å erstatte et sikkerhetsbelte som er festet til rammen i kjøretøyet, noe som kreves for et effektivt sikkerhetsbelte. Ved en plutselig stopp vil brukeren bli kastet forover med hele kraften fra stoppen. Rullestolens setebelter kan ikke hindre dette og det kan oppstå ytterligere skader fra belter eller stopper. Se avsnittet om transport i denne håndboken for ytterligere informasjon.

I. Kjøre i rullestolen

ADVARSEL

ADVARSEL: Unngå å skyve eller bruke rullestolen på myke, røffe, ujevne eller glatte overflater (inkludert, men ikke begrenset til is, sand, løs jord, gress, grus, hull i veibanen, sprekker og knuste fortau). Bruk på slike overflater kan føre til at rullestolen mister stabiliteten slik at den vipper uten at det er ventet og føre til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Se alltid fremover etter mulige hindringer eller overflateoverganger som kan føre til at svinghjulene blir sittende fast slik at rullestolen plutselig stopper. Hvis det ikke gjøres kan det føre til at rullestolen vipper uten at det er ventet og føre til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Se alltid fremover etter mulige hindringer eller overflateoverganger som kan føre til at svinghjulene blir sittende fast slik at rullestolen plutselig stopper. Hvis det ikke gjøres kan det føre til at rullestolen vipper uten at det er ventet og føre til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Se alltid fremover etter mulige gjenstander eller hindringer som rullestolen kanskje kan treffe. Hvis du treffer en gjenstand eller en hindring kan det føre til at rullestolen vipper uten at det er ventet og føre til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, eller til alvorlig personskade eller dødsfall. Dessuten kan det å treffe en gjenstand eller en hindring føre til skade på rullestolen. Faren for personskader og skade på rullestolen når du treffer en gjenstand eller en hindring øker med hastigheten.



Det er svært farlig å bruke rullestolen på offentlige veier, og det anbefales ikke. Rullestolbrukere må følge trafikreglene til fotgjengere. Gå gjennom de lokale trafikreglene, noen land tillater ikke bruk av rullestol på offentlig vei.



Balansen din påvirkes av hellingen på flatene du kjører på. Siden balansen påvirkes, vil rullestolen være mindre stabil når den er i en vinkel. Dette er spesielt viktig når du kjører sidelengs i en skråning. Å kjøre rullestolen i en skråning kan føre til at rullestolen vipper uten at det er ventet og/eller at brukeren mister stabiliteten, slik at det fører til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Når du bruker rullestolen i offentlige eller private områder (inkludert, men ikke begrenset til fotgjengeroverganger, fortau, nabolag, parkeringsplasser og parker) må du være obs på faren for motorkjøretøy. Fordi du sitter lavt:

- Når lyset er dårlig må du bruke refleks på rullestolen og klærne.
- Hvis du har forkjørsrett, hold likevel igjen til føreren av motorkjøretøyet har sett deg.



Vær ekstra forsiktig når du kjører bakover. Du ser kanskje ikke en hindring som kan føre til en velt. Hvis rullestolen velter, kan det føre til skade på stolen, alvorlig personskade eller dødsfall.



Ki Mobility anbefaler ikke å balansere bare på drivhjulene med svinghjulene i lufta (også kalt en «wheelie»). Det er svært sannsynlig at det skjer et fall eller et velt, som kan føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall. Hvis du velger å ignorere denne advarselen, ikke prøv en wheelie med mindre du har fått opplæring av en person med klinisk eller teknisk stilling. Du bør alltid ha assistanse fra en sunn og sterk person som er forberedt på å hindre at du kommer over veltepunktet.



Ikke kjør i rullestolen i en rulletrapp. Bruk av en rullestol i en rulletrapp kan forårsake et fall, et velt eller at du mister kontrollen. Et fall, et velt eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, til alvorlig personskade eller dødsfall.



Unngå å kle på eller av deg i rullestolen. Å kle på seg eller av seg i rullestolen fører til at vekten flytter seg. Dermed øker faren for at du faller

eller velter. Et fall eller et velt kan føre til skader på rullestolen, til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ki Mobility anbefaler at du bruker tilbehør som hællokker og leggstropper. Når de brukes riktig, kan hællokker og leggstropper bidra til å hindre at ben og føtter ved et uhell glir av fotplaten eller fotstøtten og kanskje fører til at føttene dine blir sittende fast i rullestolen og delene på den eller slå ned i bakken. Bruk av en rullestol uten tilbehør som riktig tilpassede hællokker og leggstropper kan føre til en potensielt farlig situasjon som kan føre til en personskade hvis den ikke avverges.

Når du bruker rullestolen din må du alltid:

- Skanne området i god avstand foran rullestolen når du kjører.
- Sørg for at overflatene du kjører på er jevne og uten hindringer.
- Fjerne eller dekke over terskler mellom rom.
- Hvis rullestolen har tippsikringer, sørg for at de er låst i stilling når du kjører rullestolen (se avsnitt P i kapittel IV for riktig bruk av tippsikring).
- Hold begge hendene på drivringene når du kjører over hindringer.
- Du må aldri skyve på eller trekke i en gjenstand for å drive frem rullestolen.
- Pass på at det ikke er et trinn nederst på rampene.
- I en skråning oppover bør du lene overkroppen litt forover for å hindre at du velter bakover.
- I en skråning nedover bør du presse overkroppen bakover for å hindre at du velter forover.
- Ikke prøv å presse deg over hindringer uten assistanse.
- Sørg for at alle ramper, hellinger eller fortausutsparinger du prøver å kjøre på overholder ADA-reglene (amerikanske regler for funksjonshemmede) eller tilsvarende regler for tilgjengelighet i ditt område.

ADA-retningslinjene og mer informasjon om tilgjengelige konstruksjoner er tilgjengelig fra: www.ada.gov

J. Hjelpemotor

ADVARSEL

ADVARSEL: Kontroller at hjelpemotoren er validert og godkjent av produsenten for bruk med Ki-rullestolen din og konfigurasjonen du har. Bruk av en ekstern hjelpemotor som ikke er godkjent, kan føre til mekanisk svikt i rullestolen eller forårsake et fall. Et fall kan føre til skade på stolen, alvorlig personskade eller dødsfall.



Hjelpemotorer endrer stabiliteten og ytelsen til rullestolen. Bruk alltid tippsikringer med hjelpemotorer. Hvis du ikke gjør det, kan det føre til at rullestolen velter bakover. Hvis rullestolen velter bakover, kan det føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall.



Se alltid fremover etter mulige gjenstander eller hindringer som rullestolen kanskje kan treffe. Hjelpemotorer endrer ytelsen til rullestolen og vil øke faren for uventet velt hvis du treffer en gjenstand eller en hindring. Et uventet velt kan føre til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen. Faren for personskader og skade på rullestolen når du treffer en gjenstand eller en hindring øker med hastigheten.



Se alltid fremover etter gjenstander eller hindringer som rullestolen din potensielt kan treffe. Elektriske drivsystemer endrer ytelsen til rullestolen og vil øke risikoen for skade på rullestolen og/eller dens komponenter. Å treffe en gjenstand eller hindring kan føre til fall eller tap av kontroll. Et fall eller tap av kontroll kan føre til alvorlig skade eller død.



Instruksjoner gitt av tredjepart for installasjon på våre rullestolmodeller må følges nøye. Feil installasjon kan føre til produktfeil, alvorlig personskade eller død, og ugyldiggjøre garantien.

Ki Mobility anbefaler ikke at det installeres hjelpemotorer på noen Ki Mobility-rullestol. Ki Mobility-rullestoler har ikke blitt konstruert eller testet av Ki Mobility som motordrevne rullestoler. Hvis du monterer en hjelpemotor på en Ki Mobility-rullestol, kontroller at produsenten av hjelpemotoren har validert og godkjent kombinasjonen av hjelpemotoren og rullestolen som sikker og effektiv.

K. Rullestolen din og miljøet

VÆR FORSIKTIG

VÆR FORSIKTIG: Hvis rullestolen utsettes for vann eller for mye fukt kan det føre til at metallet i rullestolen rustet eller korroderer og at tøyet revner. Tørk stolen så snart som mulig hvis den utsettes for vann.



IKKE BRUK RULLESTOLEN I DUSJEN, I ET BASSENG ELLER I STÅENDE VANN. Dette vil føre til at rullestolen rustet eller korroderer og til slutt feiler.



Ikke kjør rullestolen i sand. Sand kan komme inn i hjullagrene og bevegelige deler. Dette vil forårsake skader og til slutt føre til at rullestolen slutter å fungere.

L. Modifikasjoner av rullestolen

ADVARSEL

ADVARSEL: INGEN MÅ MODIFISERE DENNE RULLESTOLEN, UTENOM Å JUSTERE DEN I HENHOLD TIL DENNE HÅNDBOKEN ELLER VED Å LEGGE TIL ALTERNATIVER SOM ER GODKJENT AV KI MOBILITY. DET FINNES INGEN GODKJENTE ALTERNATIVER SOM INVOLVERER BORING I ELLER KUTTING AV RAMMEN AV NOEN ANNEN ENN EN KI MOBILITY-ANSATT MED OPPLÆRING. Rullestolen din ble konstruert og produsert under streng kontroll av utformingen. En integrert del av denne prosessen er å sikre at de forskjellige komponentene fungerer riktig sammen. De har blitt testet i henhold til forskjellige standarder for å sikre kvaliteten, og de er godkjent for å fungere sammen. Kontakt en autorisert leverandør eller Ki Mobility før du legger til noen tilbehør eller komponenter som ikke er levert av Ki Mobility. Ikke godkjente modifikasjoner eller alternativer kan føre til fall og forårsake alvorlig personskade eller dødsfall.

M. Rullestolens stabilitet

ADVARSEL

ADVARSEL: Stabiliteten på rullestolen din kan påvirkes når den brukes på myke, røffe, ujevne (oppover eller nedover) eller glatte overflater (inkludert, men ikke begrenset til is, sand, løs jord, gress, grus, hull i veibanen, sprekker og knuste fortau). Bruk på slike overflater kan føre til at rullestolen vipper uten at det er ventet og føre til et fall eller at

du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på rullestolen, eller til alvorlig personskade eller dødsfall.



Å flytte vekten i rullestolen, legge til vekt på rullestolen og bære med deg eller strekke deg etter gjenstander kan påvirke stabiliteten i rullestolen. Dermed øker faren for at du faller eller velter. Et fall eller et velt kan føre til skader på rullestolen, til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ki Mobility anbefaler ikke å balansere bare på drivhjulene med svinghjulene i lufta (også kalt en «wheelie»). Det er svært sannsynlig at det skjer et fall eller et velt, som kan føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall. Hvis du velger å ignorere denne advarselen, ikke prøv en wheelie med mindre du har fått opplæring av en person med klinisk eller teknisk stilling. Du bør alltid ha assistanse fra en sunn og sterk person som er forberedt på å hindre at du kommer over veltepunktet.



Unngå å kle på eller av deg i rullestolen. Å kle på seg eller av seg i rullestolen fører til at vekten flytter seg. Dermed øker faren for at du faller eller velter. Et fall eller et velt kan føre til skader på rullestolen, til alvorlig personskade eller dødsfall.

Strategier for å minske faren for å falle:

- Sørg alltid for at tipsikringene er i riktig stilling (se avsnitt P. i kapittel IV for riktig bruk av tipsikringer).
- Len deg forover når du kjører opp en skråning.
- Len deg bakover når du kjører ned en skråning.
- Ha en ledsager bak deg for å gi assistanse.
- Konfigurerer av rullestolen bør bare gjøres av en autorisert tekniker.
- Bruk alltid tilbehøret som følger med.
- Rullestolen må justeres av en autorisert tekniker når det er endringer i vekten din eller hvordan du sitter.
- Bruk alltid tipsikringer der det er aktuelt (se avsnitt P. for riktig bruk av tipsikringer).

For å sikre at rullestolen er stabil må du sørge for at tyngdepunktet og rullestolens støtteflate er den riktige for din balanse og evner. Mange faktorer kan påvirke disse to elementene:

- Setehøyde
- Størrelse og stilling på drivhjulene

- Setedybde
- Størrelse og stilling på svinghjulene
- Ryggvinkel
- Komponentene i setesystemet
- Setevinke
- Hellingstilling (om aktuelt)

Det er i tillegg handlinger som kan påvirke stabiliteten på rullestolen din negativt. Du bør snakke med en ekspert på hjelpesystemer eller helsepersonell som er kjent med dine behov og kapasitet for å finne ut hva du er i stand til å gjøre på en trygg måte samtidig som du beholder stabiliteten på rullestolen.

N. Seter fra en tredjepart



ADVARSEL: Installasjon av en pute på en rullestol kan påvirke tyngdepunktet til rullestolen. Endringer i tyngdepunktet kan påvirke stabiliteten i rullestolen og føre til et velt eller fall fra rullestolen, som igjen kan føre til alvorlig personskade. Gå alltid gjennom bruksanvisningen for rullestolen din for å se om endringer på rullestolen kan være nødvendig for å gi tilstrekkelig stabilitet etter at du har lagt til en pute.



Integriteten av huden din kan påvirkes av mange sider av ditt daglige liv og medisinske tilstand, inkludert bruk av dette produkt. Pass på å følge alle hudpleietiltak som legen din har satt opp. Brukere av dette produktet må passe på at huden deres inspiseres jevnlig for å se etter endringer, slik legen foreskriver det. Å ikke gjøre dette kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Valg av riktig seteprodukt

Du bør snakke med autorisert helsepersonell (dvs. lege eller terapeut) med opplæring i rullestolseter og posisjonering før du velger et produkt for sete eller posisjonering. Dette vil bidra til å sikre at du får riktig produkt for dine spesielle behov.

BRUK OG KONFIGURASJON AV RULLESTOL

A. Fortauskanter, trinn og trapper



ADVARSEL: Ikke kjør opp eller ned mer enn 1 eller 2 trinn/trappetrinn i rullestolen. Hvis du

ikke tar hensyn til disse advarslene, kan det oppstå fall, velt eller at du mister kontrollen. Det kan forårsake alvorlig skade eller dødsfall for rullestolbrukeren eller andre.

- Ikke prøv å kjøre opp over eller ned fra en fortauskant eller et trinn alene, MED MIN-DRE du er en dyktig bruker av denne stolen og:
 - du kan trygt balansere på bakhjulene («gjøre en wheelie»), og
 - du er sikker på at du har styrke og balanse til å gjøre det.
 - Lås opp og vri tippesikringene opp, ut av veien, slik at de ikke forstyrrer.
 - Ikke prøv å kjøre opp over eller ned fra en høy fortauskant eller trinn (mer enn 10 cm høy) MED MINDRE du har hjelp. Det kan føre til at stolen din overskrider balansepunktet og velter.
 - Kjør rett opp og rett ned en fortauskant eller trinn. Hvis du kjører opp eller ned på skrå er et fall eller velt sannsynlig.
 - Vær oppmerksom på at støtet når du kjører ned fra en fortauskant eller trinn kan skade stolen eller løsne festemateriell.
- Ikke kjør opp eller ned trapper i rullestolen. Å kjøre opp eller ned trapper kan være utfordrende, og kan forårsake et fall som kan føre til skade på rullestolen og personskade eller dødsfall for rullestolbrukeren og/eller assistentene.

B. Forflytning



ADVARSEL: Det er mange forskjellige forflytningsteknikker. Egnet forflytnings-teknikk avhenger av ditt funksjonsnivå og dine individuelle ferdigheter. Du bør få opplæring av en klinisk terapeut i hva som er riktig forflytningsteknikk for deg. Kontroller at du trygt kan forflytte deg på egen hånd før du prøver uavhengige forflytninger. Vær klar over at det sannsynligvis kommer et punkt i forflytningen der det ikke er et rullestolsete under deg. Hvis en forflytning ikke gjøres riktig, kan det føre til et fall som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

MERK: Før du forflytter deg ut av rullestolen din, må du ta alle forholdsregler for å redusere avstanden mellom de to overflatene.

- Sett på bremsene for å låse bakhjulene.

2. Vri svinghjulene forover for å øke hjulavstanden på rullestolen.
3. Fjern eller sving benstøttene unna.
4. Få noen til å hjelpe deg, med mindre du er svært erfaren og dyktig i forflytninger.

C. Bruk i transport

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Bruk aldri rullestolen som sete i motorkjøretøy hvis den ikke er utstyrt med transportfester. Det er alltid tryggest å forflytte seg ut av rullestolen og over til et bilsete med egnede trepunkts sikkerhetsbelter. Hvis du bruker rullestolen din som sete i et motorkjøretøy og den ikke er utstyrt med transportfester, kan det føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Rullestolen som er utstyrt med transportfeste er testet etter og har bestått RESNA WC-4, Avsnitt 19: Rullestoler brukt som seter i motorkjøretøy og ISO 7176-19 Rullestoler – Del 19: Mobilitetsenheter med hjul for bruk som seter i motorkjøretøy. RESNA- og ISO-standardene er utformet for å teste rullestolens strukturelle egenskaper som sete for bruk i motorkjøretøy. Disse er også utformet for å skape samsvar med WTORS (Wheelchair Tie-down and Occupant Restraint Systems (Systemer for sikring og innfesting av rullestoler og passasjerer).

Det er ikke alle rullestolkonfigurasjoner som er kompatible med transportfester. Ki Mobility administrerer konfigurasjonen og tilbyr ikke denne rullestolen med mindre konfigurasjonen er kompatibel. Hvis du gjør endringer på rullestolen din etter at du har mottatt den, bør du kontakte leverandøren av rullestolen eller Ki Mobility for å være sikker på at det er forsvarlig å fortsette å bruke rullestolen som sete i et motorkjøretøy.

Hoftebelter som tåler en kollisjon og instruksjoner for bruk er tilgjengelig fra Ki Mobility kundeservice. Disse skal brukes sammen med et kjøretøyforankret skulderbelte. Eksterne seter eller rygger fra en tredjepart kan ha erstattet det opprinnelige setet og ryggstøtten som ble konstruert og testet som en del av rullestolens konfigurasjon. Leverandøren av rullestolen kan fortelle om setet de leverte er opprinnelig utstyr eller en erstatning fra en tredjepart. Om rullestolen skal brukes som sete under transport i bil, må det være transportbeslag montert på rullestolen, og kjøretøyet skal imøtekomme standarden som er nevnt i dette avsnittet. Når du bruker rullestolen din som et sete i et motorkjøretøy må du alltid følge følgende instruksjoner:

- Brukeren må sitte med ansiktet vendt forover.
- Brukeren og alle gjenstander som følger med, må ikke veie mer enn 136 kg (300 pund).
- Noen konfigurasjoner av denne modellen kan overstige 28,5 tommer (724 mm) i bredde, som er den minste bredden for løfteplattformer for ADA-kompatible biler.
- Hvis rullestolen er tung eller svært stor, anbefales transport i større kjøretøy når det er mulig.
- Ryggsekker og vesker må fjernes og sikres separat i kjøretøyet. Hvis det skulle skje en ulykke, kan disse gjenstandene bli farlige prosjektiler som kan skade eller drepe deg eller passasjerer i kjøretøyet.
- Brukeren må bruke et system for sikring og innfesting av rullestoler og passasjerer som overholder RESNA WC-4, Avsnitt 18: Systemer for sikring og innfesting av rullestoler og passasjerer for bruk i motorkjøretøy eller ISO 10542-1 Tekniske systemer og hjelpemidler for ufore eller funksjonshemmede personer – systemer for sikring og innfesting av rullestoler og passasjerer – Del 1: Krav og testmetoder for alle systemer.
- Fest rullestolen i de fire festepunktene (to foran, to bak) på rullestolen med transporttilbehøret (Fig. 1) i samsvar med produsentens bruksanvisning for innfestingen og RESNA WC-4, Avsnitt 18 eller ISO 10542-1, Del 1.
- Bruk bare angitte sikkerhetspunkter for å feste rullestolen i et kjøretøy.

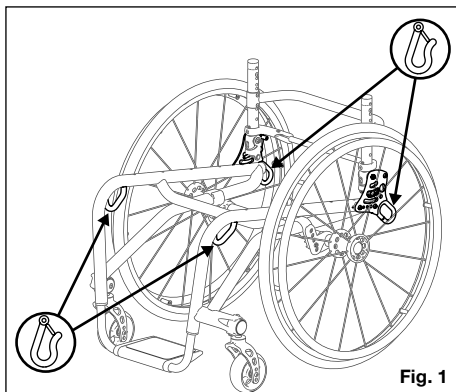


Fig. 1

- Fest sikkerhetsbelter i henhold til bruksanvisningen fra belteprodusenten og RESNA WC4, Avsnitt 18 eller ISO 10542-1, Del 1.

- Både hofte- og skulderbelter skal brukes for å redusere muligheten for at hode og bryst støter sammen med kjøretøykomponenter.



⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Sørg for at utløsermekanismene for setebeltene ikke aktiveres av rullestolkomponenter under en kollisjon. Aktivisering av utløsermekanismene for setebeltene under en krasj kan føre til alvorlig skade eller død.

- Nakkestøtter, sidestøtter eller annet posisjoneringsutstyr skal ikke brukes eller anses som tilstrekkelig til å holde fast brukeren. Disse beltene skal plasseres slik at de ikke forstyrrer riktig plassering av belter som tåler en kollisjon, og skal ikke anses som tilstrekkelig brukerskyttelse i kollisjonssituasjoner med mindre holdningsbeltet er utformet for å overholde, og yte i forhold til krav 4.6, 5.2, 5.3 og 6.1 av RESNA WC-4.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Ryggstøtter med justerbare hellingsvinkler skal ikke helles bakover mer enn 30 grader fra loddrett under kjøring av bilen, med mindre det er nødvendig for bruk-erens holdningsmessige og medisinske behov. Etter at stolen er innstilt og tilpasset, skal øvre del av rullestolens støtteflate være mindre enn 4 tommer (10,2 cm) lavere enn toppen av skulderen din. Hvis ryggstøtten og hellingsvinkler ikke justeres riktig, kan det føre til alvorlig personskade eller død.


- Alle seter som kjøpes senere, bør være testet og overholde RESNA WC-4, Avsnitt 20 eller ISO 16840-4 - Del 4.
- Fest setet til rullestolens ramme i henhold til bruksanvisningen fra seteproduzenten og RESNA WC-4, Avsnitt 20 eller ISO 16840-4, del 4.
- Tilbehør som bord, oksygenflaskeholder, oksygenflasker, IV-stativ, ryggsekker, vesker eller annet tilbehør

som ikke er produsert av KI Mobility, bør tas av og oppbevares separat på et egnet sted i kjøretøyet. Hvis det skulle skje en ulykke, kan disse gjenstandene bli farlige prosjektiler som kan skade eller drepe deg eller passasjerer i kjøretøyet.

- Dersom rullestolen har vært involvert i en ulykke bør den ikke brukes, siden det kan ha oppstått usynlige skader eller materialtretthet.

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hvis de innvendige komponentene i bilen ikke kan fjernes fra den frie sonen, spesielt de som vil være i nærheten av brukerens hode under en sidekollisjon eller en bilvelt, må de polstres med materiale som er i samsvar med FMVSS 201. Hvis innvendige komponenter i den frie sonen ikke polstres, kan det føre til alvorlig personskade eller død.

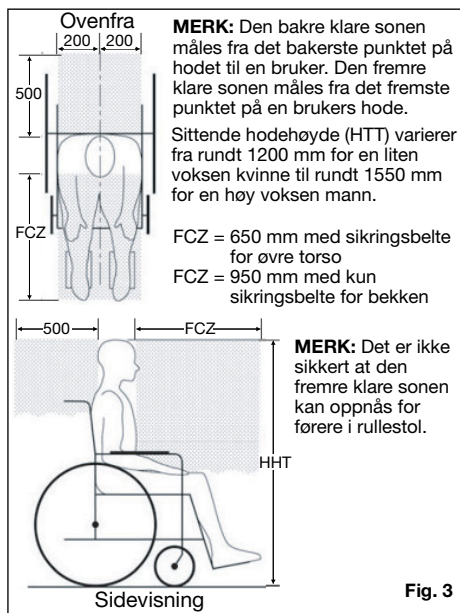

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Fjern og oppbevar alt som er midlertidig festet til stolen når den brukes i et motorkjøretøy. Hvis du lar gjenstander være festet til ventilatorbrettet, batteribrettet eller oksygentankholderen og ikke fester dem tilstrekkelig og for seg selv i kjøretøyet, kan disse gjenstandene bli farlige prosjektiler hvis det skjer en ulykke. Oksygentanker inneholder også gass som under høyt trykk er en kraftig akselerator ved brann. Disse

faktorene kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall for brukeren og/eller andre i kjøretøyet.

- Når du bruker denne rullestolen som et sete i et motorkjøretøy, må du fjerne alle gjenstander som er festet til ventilatorbrettet, batteribrettet eller oksygentankholderen og sikre dem riktig og separat.
- Hvis stolen er utstyrt med en oksygentankholder, må rullestolen aldri brukes som et sete i et motorkjøretøy.

MERK: For å få kopier av RESNA- eller ISO-standardene (engelsk), kontakt standardorganisasjonene nedenfor:

RESNA

www.resna.org

ANSI-/RESNA-standarder:

RESNA WC-4, Section 18:

Systemer for sikring og innfesting av rullestoler og passasjerer for bruk i motorkjøretøy.

RESNA WC-4, Avsnitt 19:

Rullestoler brukt som seter i motorkjøretøy.

RESNA WC-4, Avsnitt 20:

Rullestolsetesystemer for bruk i motorkjøretøy).

ISO (Den internasjonale standardiseringsorganisasjonen)

www.iso.org

ISO-standarder:

ISO 10542-1 Tekniske systemer og hjelpemidler for uføre eller bevegelsehemmede personer –

sikringssystemer og festing av rullestoler og -passasjerer – del 1:

Kav og testmetoder for alle systemer.

ISO 16840-4 Rullestolseter – del 4:

Seter for bruk i motorkjøretøy.

ISO 7176-19 Rullestoler – Del 19:

Mobilitetsenheter med hjul for bruk som seter i motorkjøretøy.

U.S. Department of Transportation

FMVSS 201

www.nhtsa.gov

Occupant Protection in Interior Impact - Upper Head Impact Protection

Trafikktestresultater

Vurdering av lateral stabilitet er God.

Type belte – tre-punkt

Vurdering av hvor enkelt der er å plassere et trepunktsbelte, er Utmerket

Vurdering av i hvilken grad riktig trepunktsbelte kan oppnås, er 16/16.

D. Bruk av puter



ADVARSEL: Unngå å sitte i lange tidsperioder uten en skikkelig rullestolpute. Å sitte over lengre tid uten en skikkelig rullestolpute kan føre til trykksår som kan gi alvorlige infeksjoner eller til og med dødsfall.



Fest puten før bruk eller forflytninger. Hvis puten ikke festes, kan den gli ut under bruk eller forflytninger og føre til et fall eller at du mister kontrollen. Et fall eller at du mister kontrollen kan føre til skader på stolen eller til alvorlig personskade eller død for deg eller andre.

- Denne rullestolen ble konstruert for bruk med en skikkelig rullestolpute.
- Tøytrekket er standard og er utstyrt med borrelåsstriper for festing. Puten som brukes må ha borrelåsfester som kan festes på stripene i setetøyet for å holde puten fast og hindre at den sklir ut under deg. Kontroller at puten sitter godt før du forflytter deg til eller sitter i rullestolen.
- Et standard tøyetsete er kanskje ikke inkludert med stolen din. Sjekk med leverandøren av rullestolen om en erstatning fra tredjepart har blitt levert for å erstatte det opprinnelige tøyetsetet. Hvis det er tilfelle, pass på å følge bruksanvisningen fra denne produsenten.

E. Transport av en rullestol uten bruker

Ki Mobility rullestoler er generelt egnet for transport i motorkjøretøyer og fly. Rullestoler bør alltid festes (spesifikke instruksjoner fra transportøren er nødvendig). Avhengig av rullestolkonfigurasjon kan en spesiell rullestol være for stor for transport i enkelte motorkjøretøyer eller fly. Se andre avsnitt om hvordan du fjerner tilleggsutstyr og tilbehør for å redusere størrelsen for å få plass.

F. Rogue DT og delene den består av

- Inspiser og vedlikehold stolen ut fra informasjonen du finner i avsnittet Vedlikehold og pleie.
- Hvis du oppdager et problem, kontakt den autoriserte leverandøren med en gang.

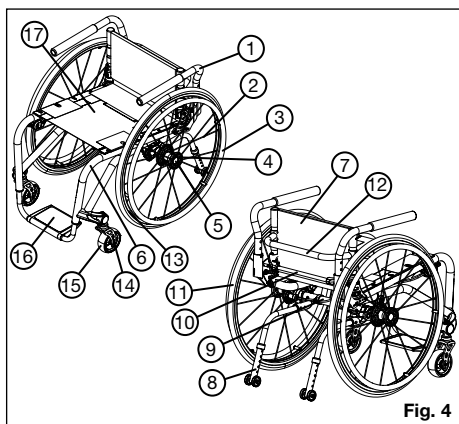


Fig. 4

- | | |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Svingbart arm-
lene | 9. Camber-rør |
| 2. Eike | 10. Utløserstag |
| 3. Drivring | 11. Hjul |
| 4. Drivhjulnav | 12. Avstivningsstag |
| 5. Hurtigkobling-
sakse | 13. Aluminiumsfelg |
| 6. Ramme | 14. Svinghjulgauffel |
| 7. Ryggstøttepol-
string | 15. Svinghjul |
| 8. Tippetsikring | 16. Fotplate |
| | 17. Setepolstring |

G. Høydejusterbart T-armlene

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Disse armlenene har kun en lås mot rotasjon og er bare konstruert for å tåle belastning ovenfra. De løsner hvis de trekkes opp og kan ikke brukes for å løfte eller håndtere stolen på en annen måte. Hvis du ikke følger anvisningene over, kan det føre til at armlenet løsner fra rullestolen uten at det er meningen og føre til fall eller at du mister kontrollen og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Hvordan bruke armlenet

1. Installasjon
 - a. Skyv den ytre armlenestangen inn i motstykket som er montert på rullestolens ramme.
 - b. Armlenet låses automatisk på plass. Kontroller for å sikre at låsespaken er som vist (fig. 5:B).
2. Høydejustering
 - a. Roter utløerspaken (fig. 5:A).
 - b. Skyv armleneputen opp eller ned til ønsket høyde.

- c. Returner spaken til den låste stillingen mot armlenestangen.
- d. Skyv armlenet inntil øvre arm låses på plass. Kontroller for å sikre at låsespaken er som vist (fig. 5:A).

3. Å fjerne armlenet

- a. Klem inn utløerspaken (fig. 5:B) og fjern armlenet.

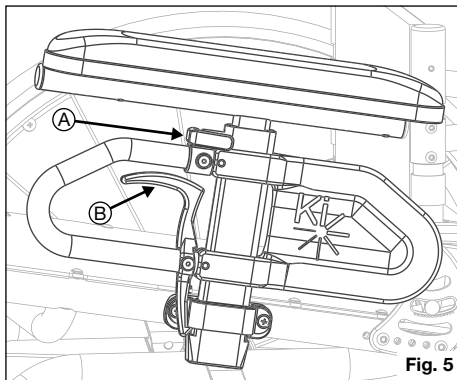


Fig. 5


H. Svingbare armlener

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Disse armlenene har bare en lås mot rotasjon og er kun konstruert for å tåle nedadrettet kraft. De løsner hvis de trekkes opp og kan ikke brukes for å løfte eller håndtere stolen på en annen måte. Hvis du ikke følger anvisningene over, kan det føre til at armlenet løsner fra rullestolen uten at det er meningen og føre til fall eller at du mister kontrollen og kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall.

Hvordan bruke armlenet

1. Installasjon (fig. 6)
 - Skyv armlenet inn i røret på motstykket som er montert på baksiden av rammen.
2. Å svinge armen
 - Løft armlenet litt slik at det er fritt fra stiftene i motstykket. Sving bort fra stolen.
3. Å fjerne armlenet
 - Løft armlenet rett ut av motstykket.

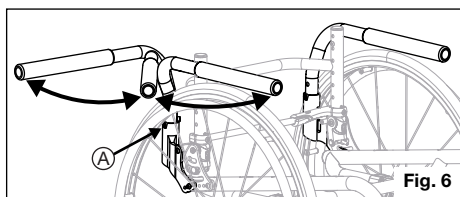

I. Drivhjulene




ADVARSEL

ADVARSEL: Før stolen brukes, sørg for at trykkknappen er helt ute og at låsekulene på innsiden er helt innkoblet. Hvis det ikke gjøres, kan det føre til at hjulet faller av, noe som kan føre til et fall eller velt med alvorlig personskade eller dødsfall for deg eller andre.

Hvordan bruke drivhjulene

1. Monter hjulene
 - a. Trykk inn hurtigutløserknappen (fig. 7:B) på akselen (fig. 7:A) slik at låsekulene kan trekkes tilbake. Merk deg forskjellen mellom når akselutløserknappen er helt ute eller helt inne, og hvilken effekt det har på låsekulene på den andre enden av akselen.
 - b. Sett akselen inn i lagerhuset på hjulet hvis det er adskilt.
 - c. Trykk hurtigutløserknappen på nytt og skyv akselen inn i akselhylsen (fig. 7:C).
 - d. Slipp knappen for å låse akselen i hylsen. Hvis utløserknappen ikke kommer helt ut og låsekulene ikke flytter seg til låst stilling etter at knappen er sluppet, må aksellengden justeres.
 - e. Hvis hjulet ikke passer, prøv å installere det på motsatt side.

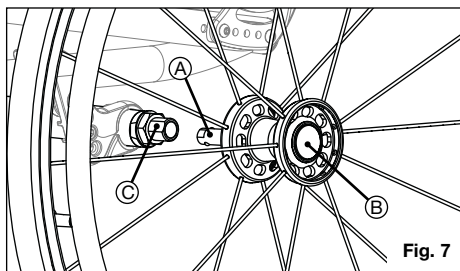

2. Fjerne hjulene

- a. Holde hjulene tett til navet og skyv inn knappen på den utvendige enden på akselen.


- b. Fortsett å holde knappen inne og trekk hjulet og akselen ut av akselhylsen.

J. Justering av fotstøtten

Hvordan endre høydejusteringen av fotstøtten

MERK: Høyden på fotstøtten bør stilles inn gjennom samarbeid med klinikere for å sikre at den er riktig tilpasset for dine behov.


1. Løsne settskruen (fig. 8:A) på hver side av rammen med en 3 mm unbrakonøkkel. Ikke fjern skruene.
2. Juster fotstøtterøret opp eller ned for å få ønsket høyde (fig. 8:B).
3. Sørg for at begge sidene justeres likt og stram hver settskrue til 4,5 Nm (40 tomme-pund).

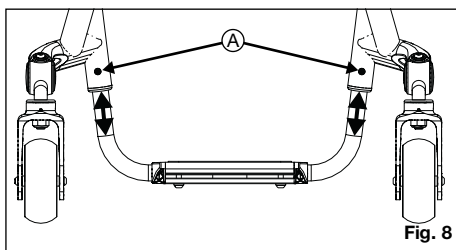

K. Vinkeljusterbar fotstøtte

Slik justerer du vinkelen på den justerbare fotplaten i aluminium uten forhøyningsstykker:

1. Løsne de to skruene (fig. 9:A) på toppen av fotstøtten ved hjelp av en 4 mm unbrakonøkkel. Det finnes nyloc-muttere nedsenket på undersiden av festeklemmen. Pass på at disse ikke faller ut når du løsner skruene.
2. Vri fotstøtten til ønsket vinkel og fest ved å stramme de to skruene på nytt (fig. 9:A).

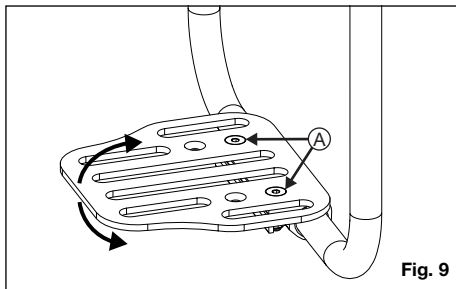

Slik justerer du vinkelen på den justerbare fotplaten i aluminium med forhøyningsstykker:

1. Løsne de to skruene (fig. 10:A) på bunnen av fotstøtten med en 4 mm unbrakonøkkel.
2. Vri fotstøtten til ønsket vinkel og fest ved å stramme de to skruene på nytt (fig. 10:A).

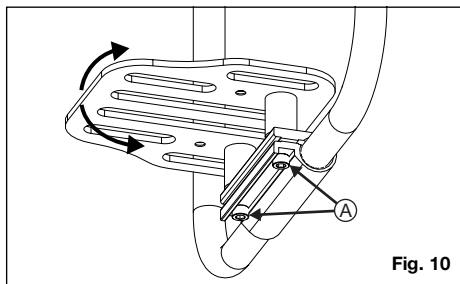


Fig. 10

L. Vinkeljusterbar oppfellbar fotstøtte som vippes inn under

Endre posisjonen på den vippbare fotplaten i aluminium:

1. Vipp fotplaten opp.
2. Løsne de to skruene (fig. (11:A) i den justerbare festeklemmen under fotplaten ved hjelp av en 4 mm unbrakonøkkel.
3. Vri fotstøtten til ønsket vinkel og fest ved å stramme de to skruene på nytt (fig. 11:A).

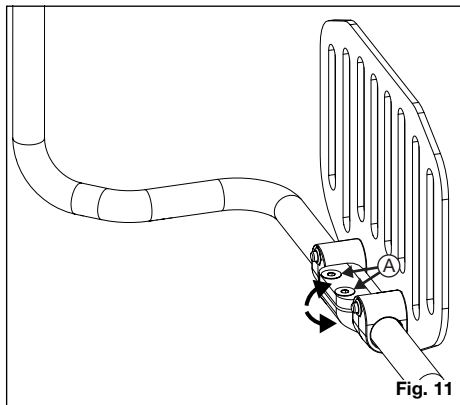


Fig. 11

M. Hybrid Vinkeljusterbar fotstøtte

Hvordan justere vinkelen på den vinkeljusterbare fotplaten:

1. Løsne de to skruene (fig. 12:A) på bunnen av fotstøtten med en 4 mm unbrakonøkkel.
2. Vri fotstøtten til ønsket vinkel og fest ved å stramme de to skruene på nytt (fig. 12:A).

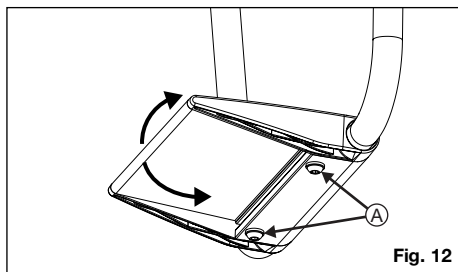


Fig. 12

N. Hjullåser

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Dekk med lite luft eller som er slitte, kan føre til at hjullåsene ikke fungerer som de skal. Hvis hjullåsene ikke holder stollen kan det føre til at du mister kontrollen eller et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.



Drivhjulbremsen skal ikke brukes til nedbremsing eller å stoppe rullestolen. Hvis drivhjulbremsen brukes til nedbremsing kan det føre til at du mister kontrollen eller et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.

Hvordan du justerer hjullåsene

MERK: Du må alltid løsne og stramme hjulmekanismen ved å veksle mellom de to boltene mens du løsner/strammer litt om gangen. Dette forhindrer at en side av mekanismen klemmes for hardt. Det kan føre til at festemidlene låser seg og blir vanskelig å fjerne.

1. Bruk en 5 mm unbrakonøkkel for å vri én av skruene i klemmen til den løper lett (mindre enn én omdreining). Se Fig. 13:A.
2. Gjenta trinn 1 med de andre skruene slik at klemmen kan justeres på rammen.
3. Juster klemmen langs rammen slik at bremsene klemmer sammen dekket slik den skal og forhindrer alle hjulbevegelser.

4. Stram skruene på nytt.
5. Test alltid en ny plassering av hjullåsene på en flat overflate. Så snart låsene er koblet inn, skal ikke hjulene gli eller bevege seg. Hvis hjullåsene ikke er satt riktig på, juster hjullåsen på nytt.

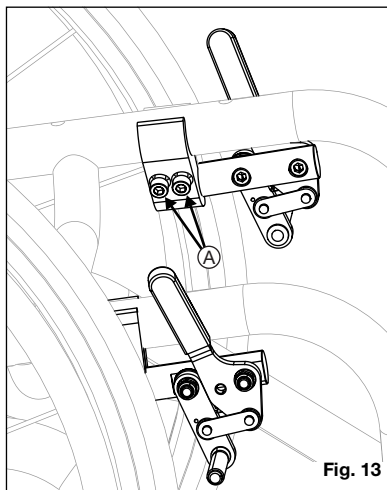


Fig. 13

Bruk av hjullås

1. Hvordan hjullåsen skal brukes, avhenger av hvilken type hjullås stolen er utstyrt med. Hjullåsstangen presses mot dekket enten ved å skyve eller trekke i hjullåshåndtaket for å låse hjullåsstangen fast mot hjulet.
2. Hjullåsen løsnes ved å bevege håndtaket i motsatt retning.

Bruk av forlengelse til hjullås

1. Håndtak med forlengelse til hjullås er utformet slik at de glir over eksisterende hjullåshendel for å gi bedre tilgang til hjullåsen og øke kraften ved aktivering og deaktivering.
2. Håndtakene bør fjernes ved forflytning for å sikre at hjullåsene ikke deaktiveres.

Stigningshjelp

Stigningshjelp er en assisterende innretning som forhindrer at rullestolen triller tilbake på skråplan, for eksempel i bakker eller på ramper.

1. Aktiver stigningshjelp ved å trykke ned enden av spaken for å hindre tilbaketrilling.
2. Deaktiveres ved å trekke spaken opp igjen.

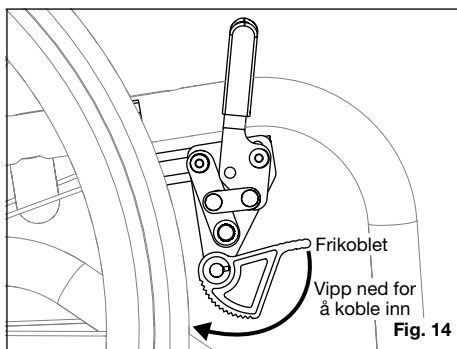


Fig. 14

0. Navlåser

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Før bruk av rullestolen og navlås, kontroller alltid: 1. Begge bakhjulene og hurtigkoblingsaksene er korrekt låst på plass; 2. Begge navlåsboltene er fullstendig satt inn i navlåsplaten når navlåsen er aktivert; 3. Begge navlåsboltene trekker seg korrekt tilbake fra navlåsplaten når navlåsen er deaktivert. Unnlatelse av å kontrollere korrekt aktivering og deaktivering kan føre til utilsiktet bevegelse av rullestolen og/eller begrenset bevegelse, noe som kan resultere i skade på rullestolen eller komponentene, at man blir stående fast, immobilisert eller opplever tap av balanse og/eller fall. Å bli stående fast, immobilisert eller oppleve tap av balanse og/eller fall kan føre til alvorlige personskader eller død.



Navlåser skal ikke brukes som brems for å sakke ned eller stoppe rullestolen mens den er i bevegelse. Bruk av navlås som brems kan føre til skade på rullestolen eller komponentene, velt, tap av balanse og/eller fall. Velt, tap av balanse og/eller fall kan føre til alvorlige personskader eller død.



Rullestolen vil ikke stå stille med mindre navlåsen er korrekt aktivert. Unnlatelse av å kontrollere aktivering kan føre til at rullestolen ruller når den står uten tilsyn, noe som kan resultere i skade på rullestolen eller komponentene og/eller at man blir stående fast. Å bli stående fast kan føre til alvorlige personskader eller død.



Det vil alltid være en viss bevegelse av rullestolen forover og bakover når navlåsen er aktivert. Du bør få opplæring av helsepersonell i riktig

forflytningsteknikk tilpasset deg når du bruker navlås. Sørg for at du kan forflytte deg trygt på egen hånd før du forsøker å gjøre dette uten hjelp. Vær oppmerksom på at det sannsynligvis vil være et punkt under forflytningen der rullestolsetet ikke er under deg. Unnlatelse av å utføre en forflytning riktig kan føre til tap av balanse og/eller fall. Tap av balanse og/eller fall kan føre til alvorlige personskader eller død.



Brukeren eller ledsageren må alltid kontrollere at navlåsen er korrekt aktivert før forflytning inn i eller ut av rullestolen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til utilsiktet bevegelse av rullestolen, noe som kan resultere i tap av balanse og/eller fall. Tap av balanse og/eller fall kan føre til skade på rullestolen eller komponentene, alvorlige personskader eller død.



Brukeren eller ledsageren må alltid kontrollere at navlåsen er helt deaktivert før fremdrift. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til begrenset hjulbevegelse, noe som kan resultere i skade på rullestolen eller komponentene, personskader, tap av balanse og/eller fall. Tap av balanse og/eller fall kan føre til alvorlige personskader eller død.



Rullestolen skal ikke brukes dersom det er mistanke om utilsiktet aktivering av navlåsen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til plutselig begrensning av hjulrotasjonen under bevegelse, noe som kan resultere i skade på rullestolen eller komponentene, tap av balanse og/eller fall. Tap av balanse og/eller fall kan føre til alvorlige personskader eller død.



Rullestolen skal ikke brukes når det er motstand eller utilsiktet begrenset hjulrotasjon. Ikke forsøk å overvinne en delvis aktivert eller fastsittende navlås ved å bruke overdreven kraft eller ved å gyanke rullestolen. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til skade på rullestolen eller komponentene, personskader, tap av balanse og/eller fall. Tap av balanse og/eller fall kan føre til alvorlige personskader eller død.



Brukeren eller ledsageren skal ikke aktivere navlåsen i en oppover- eller nedoverbakke. Hvis rullestolen står i en oppover- eller nedoverbakke, kan navlåsen sette seg fast. Ethvert forsøk på å frigjøre rullestolen kan føre til plutselig og ukontrollert beve-

gelse når den løsner, noe som øker risikoen for velt, tap av balanse og/eller fall. Velt, tap av balanse og/eller fall kan føre til skade på rullestolen og komponentene og/eller alvorlige personskader eller død.



Utilsiktet aktivering av navlåsen mens rullestolen er i bevegelse kan plutselig begrense hjulrotasjonen og føre til tap av kontroll, noe som kan resultere i velt, tap av balanse og/eller fall. Velt, tap av balanse og/eller fall kan føre til skade på rullestolen og komponentene og/eller alvorlige personskader eller død.

Navlåser sikrer rullestolen ved at navlåsboltene går i inngrep med navlåsplatene som er montert på bakhjulenes nav, og forhindrer at hjulet roterer. Når navlåsen er korrekt aktivert, begrenser den bevegelsen til bakhjulene og bidrar til å holde rullestolen i en stasjonær posisjon.

En aktiveringsspak styrer begge sider av navlåsen. Spaken kan være plassert på høyre eller venstre side på den øvre rammen av rullestolen. I enkelte tilfeller, der kort setedybde og transit er aktuelt, kan aktiveringsspaken være plassert på den nedre rammen.

Før hver bruk, kontroller korrekt aktivering og deaktivering:

Slik kontrollerer du korrekt innkobling av bakhjul og hurtigkoblingsaksler:

- Se avsnittet «Bakhjul» for instruksjoner.

Slik aktiverer du og kontrollerer korrekt aktivering av navlåsen:

1. Sett spaken til aktivert posisjon (fig. 15).

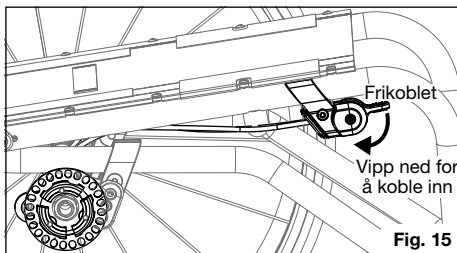


Fig. 15

2. Bruk minimal kraft, roter bakhjulene litt fremover eller bakover til navlåsboltene går i inngrep med platen.
3. Kontroller visuelt at navlåsboltene er helt satt inn i navlåsplatene (fig. 16:A).

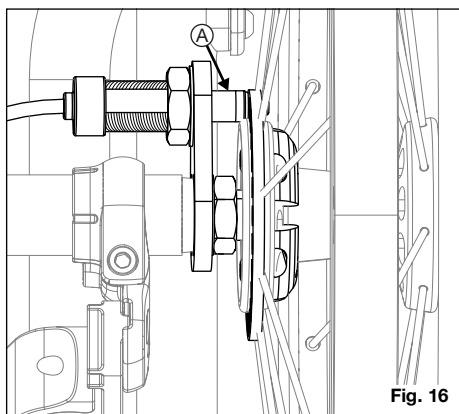


Fig. 16

Slik aktiverer du og kontrollerer korrekt deaktivering av navlåsen:

1. Sett spaken i deaktivert posisjon (fig. 15).
2. Kontroller visuelt at navlåsboltene er helt trukket tilbake fra navlåsplaten (fig. 17:A).

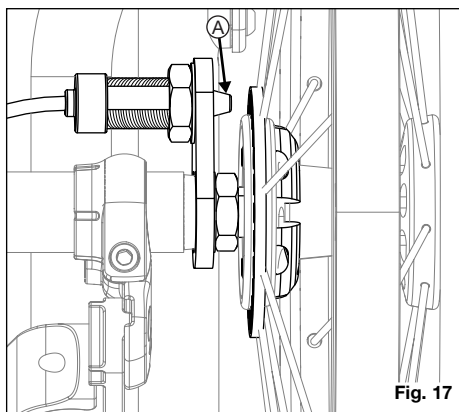


Fig. 17

Slik justerer du posisjonen til aktiveringsspaken langs rammen (flytting av aktiveringsspaken til et annet rør kan kun utføres av en fagperson innen hjelpemiddelteknologi eller en kompetent klinisk eller teknisk fagperson):

1. Løse settskruen med en 2,5 mm unbrakonøkkel.
2. Bruk to 3 mm unbrakonøkler til å dreie skruen i festeklemmen til den går lett.
3. Juster festeklemmen langs rammen til aktuatoren er i ønsket posisjon.
4. Før tilstramming, kontroller at aktiveringsspaken kan aktiveres og deaktiveres uten hindring.
5. Stram skruene igjen med to 3 mm unbrakonøkler.

6. Stram settskruen igjen med en 2,5 mm unbrakonøkkel.
7. Kontroller at kablene ikke kommer i konflikt med bakhjulene eller andre bevegelige komponenter, og at de er festet til rammen.
8. Test alltid ny posisjonering av aktiveringsspaken før bruk.

P. Tippsikringer

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Hold alltid tippsikringene nede når det ikke er fare for at de er forstyrrende. Få en kliniker eller tekniker til å bekrefte at tippsikringene er installert i rett posisjon. De kan gjøre det ved å tippe rullestolen med bruker bakover mot tippsikringene for å teste at de på riktig måte hindrer at rullestolen tipper bakover. Hvis tippsikringene tillater at rullestolen tipper til et punkt der tyngepunktet er rett over punktet der hjulene berører bakken, er rullestolen ustabil og det kan føre til at rullestolen velter. Hvis rullestolen velter, kan det føre til skade på stolen, alvorlig personskade eller dødsfall.



Nye og erfarne rullestolbrukere som bytter til en ny rullestol eller justerer konfigurasjonen på en rullestol de har fra før, bør alltid bruke tippsikringer. Hvis brukeren har en endring i fysiske evner, bør de også bruke tippsikringer. Alle endringer i brukers fysiske evner eller på rullestolen øker faren for at rullestolen tipper bakover. Hvis rullestolen velter bakover, kan det føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall. Du bør alltid bruke tippsikringer til du har vent deg til den nye eller justerte rullestolen.



Fjern eller vri tippsikringene opp når du kjører opp eller ned fortauskanter, hindringer og trinn. Hvis tippsikringene er nede for kjøring opp eller ned fortauskanter, hindringer og trinn, kan de bli bøyd eller knekke. Hvis tippsikringene er bøyd eller knekt, vil de ikke lenger hindre rullestolen i å velte bakover. Hvis rullestolen velter bakover, kan det føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall.



Hvis du bruker rullestolen på myke overflater (inkludert, men ikke begrenset til sand, løs jord, gress og grus), ujevne hellinger og ramper kan

føre til at tippsikringen Hvis rullestolen velter bakover, kan det føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall.



Ki Mobility anbefaler to tippsikringer på rullestolen. Bruk av en enkelt tippsikring øker faren for at rullestolen velter bakover. Hvis rullestolen velter bakover, kan det føre til skade på rullestolen, alvorlig personskade eller dødsfall.

Ki Mobility anbefaler at det brukes tippsikringer på rullestolen. Tippsikringer bidrar til å hindre at rullestolen velter bakover. Når de er riktig justert, gir tippsikringer en betydelig økning av stabiliteten bakover. Bruk av tippsikringer garanterer ikke at rullestolen ikke velter. Husk alltid på å sette på eller vippe tippsikringene ned etter at de har vært fjernet eller vippet opp.

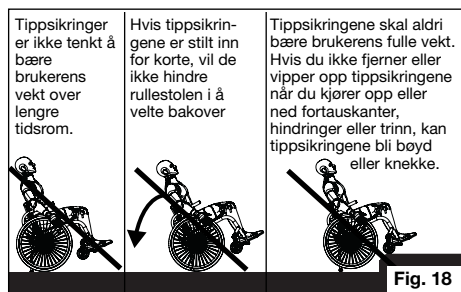


Fig. 18

Hvordan installere standard tippsikringer (Fig. 19)

1. Trykk utløserstiften for bakre tippsikring (fig. 19:A) på røret for tippsikringen bak, slik at begge utløserstiftene forsvinner inn.
2. Stikk tippsikringsrøret inn i motstykket som sitter på camber-røret.
3. Vri tippsikringsrøret nedover til utløserstiften er på plass gjennom motstykkets monteringshull.
4. Sett inn det andre tippsikringsrøret på samme måte.

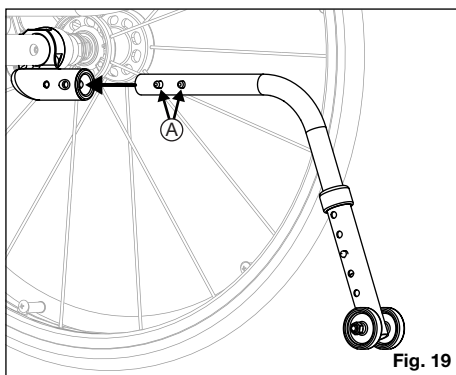


Fig. 19

Hvordan justere høyden på hjulutstrekkningen (fig. 20)

1. Trykk utløserstiften for tippsikringshjulet slik at utløserstiften (fig. 20:B) trekkes inn.
2. Hev eller senk tippsikringen til et av de forhåndsborede hullene.
3. Slipp stiften.
4. Juster det andre røret for tippsikringshjul på samme måte. Begge hjulene må være i nøyaktig samme høyde.

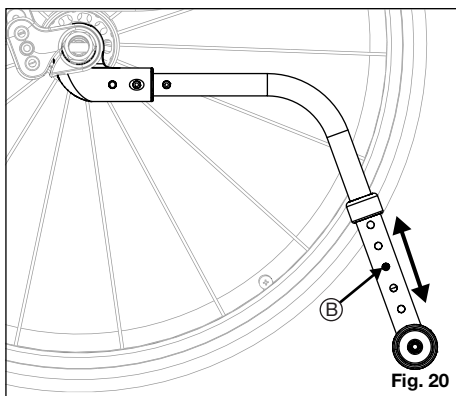


Fig. 20

Hvordan vri tippsikringsrørene opp (fig. 21)

1. Trykk utløserstiften for røret til bakre tippsikring (fig. 21:A).
2. Hold stiften inne og vri røret for tippsikringen opp.
3. Slipp stiften.
4. Gjenta med det andre røret.
5. Sett rørene for tippsikringene tilbake til ned-stillingen etter at manøveren er gjennomført.

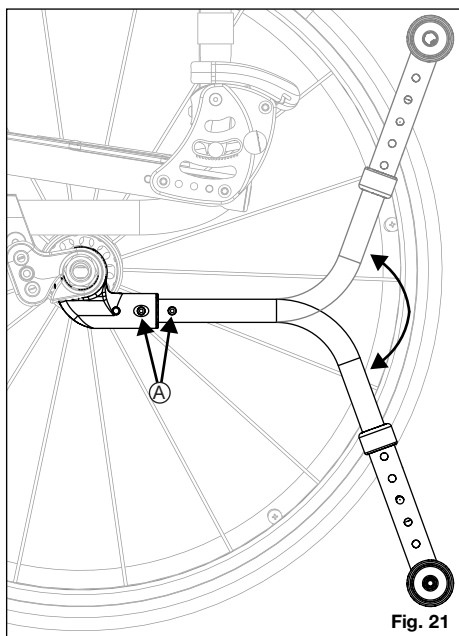


Fig. 21

Hvordan du justerer lengden på brukeraktiverte tippetikringer (fig. 22)

1. Trykk utløserstiften for tippetikringshjulet slik at utløserstiften forsvinner inn.
2. Hev eller senk tippetikringen til et av de forhåndsborede hullene.
3. Slipp stiften.
4. Juster det andre røret for tippetikringshjul på samme måte. Begge hjulene må være i samme høyde.

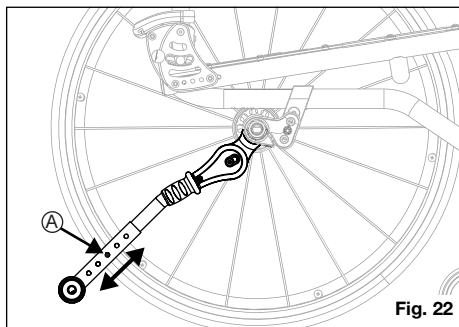


Fig. 22

Slik aktiverer og feller du opp de brukeraktiverte tippetikringene (Fig. 23)

1. Grip tak i det gummibelagte håndtaket og trekk ned, slik at tippetikringen løsner fra slissen i holderen.
2. Vri til ønsket posisjon. Tippetikringen skal holde seg i posisjon så snart du slipper det gummibelagte håndtaket.
3. Juster det andre røret for tippetikringshjul på samme måte. Begge hjulene må være i nøyaktig samme høyde.

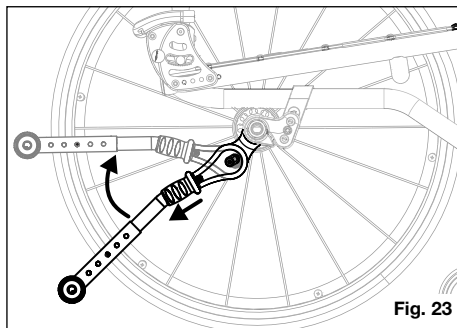


Fig. 23

Slik setter du de brukeraktiverte tippetikringene i oppbevaringsposisjon (fig. 24)

1. Løft rullestolen slik at drivhjulene er over bakken.
2. Grip tak i det gummibelagte håndtaket og trekk ned, slik at tippetikringen løsner fra slissen i holderen.
3. Drei dem under rullestolen i transportstillingen. Tippetikringen skal holde seg i posisjon så snart du slipper det gummibelagte håndtaket.
4. Juster røret til den andre tippetikringen på samme måte. Begge tippetikringene skal ha samme posisjon.

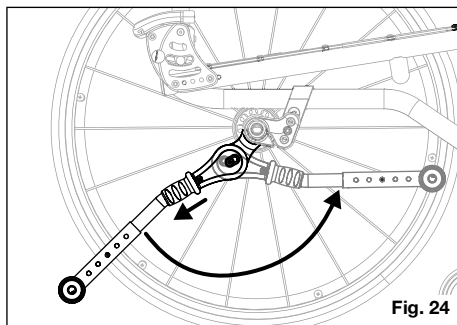


Fig. 24

Q. Polstring og tøy

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Du må skifte ut sete- og ryggpolstring umiddelbart hvis stoffet er slitt gjennom og kanskje vil revne. Hvis du ikke gjør det, kan setet eller ryggen revne og forårsake et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.

Materialet i seteduken vil svekkes over tid. Den gjentatte bevegelsen ved forflytning til rullestolen din vil svekke materialet raskere. Inspiser polstringen og se etter frynser, tynne flekker eller om tøyet strekkes, spesielt langs kanter og sømmer. Dette bør gjøres månedlig. Vær også klar over at vasking eller for mye fuktighet vil redusere brannhemmingen i tøyet. Se avsnittet om Vedlikehold og pleie for riktige anvisninger for rengjøring og vedlikehold. Kontakt din autoriserte leverandør hvis du er bekymret for setet eller ryggen, eller mener at de må skiftes.

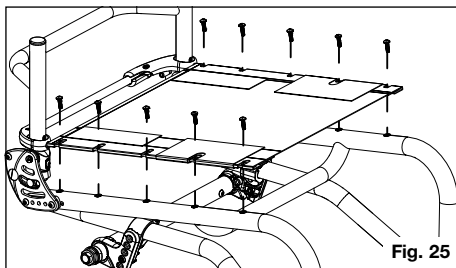


Fig. 25

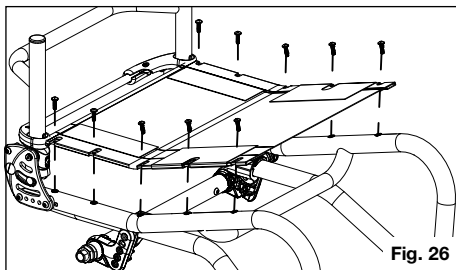


Fig. 26

R. Setetrekk

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Du må skifte ut sete- og ryggpolstring umiddelbart hvis stoffet er slitt gjennom og kanskje vil revne. Hvis du ikke gjør det, kan setet eller ryggen revne og forårsake et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.

Hvordan justere setetrekket

1. Strekk deg inn under setetrekket for å finne klaffen med borrelås som justerer strammingen. Den skal du finne på undersiden, på høyre side av setepolstringen.
2. Løsne skruene (fig. 25,26) på samme side av setetrekket som klaffen for justering av strammingen befinner seg.
3. Åpne borrelåsen på justeringsklaffen ved å trekke delene fra hverandre.
4. For å stramme setetrekket, trekk justeringsklaffen mot den motsatte siden av stolen. For å løsne setetrekket, press fra toppen av setetrekket ned mot bakken.
5. Når setetrekket har ønsket tensjons-nivå, fører du borrelåsene sammen igjen.
6. Stram til stjernehodskruene på nytt (fig. 25,26).

Hvordan skifte setetrekk

1. Fjern stjernehodskruene på 5 mm (fig. 25,26) fra seteskinnene på hver side av rammen, og legg de til siden.
2. Fjern setetrekket fra seteskinnene.
3. Skyv det nye setetrekket inn på seteskinn-ene.
4. Rett inn hullene i seteskinnene med de gjengede innsatsene i rammen.
5. Sett inn de 5 mm stjernehodskruene igjen (fig. 25,26) ved å skru dem delvis inn. Så snart alle skruene er satt delvis inn, går du tilbake og strammer alle.

S. Ryggstøtte

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Du må skifte ut sete- og ryggpolstring umiddelbart hvis stoffet er slitt gjennom og kanskje vil revne. Hvis du ikke gjør det, kan setet eller ryggen revne og forårsake et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke sitt i eller kjør stolen hvis ryggstøtten ikke er låst. Å gjøre det kan føre til et fall som fører til alvorlig personskaade eller dødsfall.

Slik bruker du den sammenleggbare ryggstøtten

1. Løft utløserstaget for ryggen (fig. 27:A) som ligger bak bakrammen, for å løse ut låsen og fold ryggen ned mot seterammen.

men (fig. 27). For å låse den på plass igjen, trekk utløserstaket for ryggen utover og ryggen vil løsne og kan nå skyves til opprett stilling. Ryggstøtten låses automatisk inn i bakplate.

2. Sørg for at ryggen låses ved å trekke iryggstøtten frem i oppreist stilling.

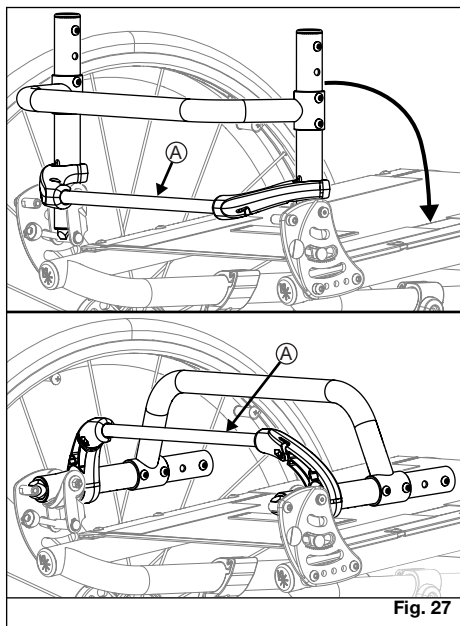


Fig. 27

Hvordan du kan bruke hvilestillingen (Fig. 28)

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Fjern vekten fra ryggstøtten når du kobler inn avslapningsposisjonen. Unnlattelse av å gjøre det kan føre til en velting. En velting eller fall kan føre til skade på stolen, alvorlig skade eller død.



Avslappingsposisjonen påvirker stabiliteten til stolen og øker risikoen for å velte. En velting kan føre til skade på stolen, alvorlig personskade eller død.

Ryggstøtten har to innstillinger (4 og 9 grader), den bakerste gir det vi kaller «hvile stilling» og som har to innstillinger, fire og ni grader.

1. Len deg litt fremover for å avlaste låsesiftene, og trekk så utløserstaket opp (fig. 28:A) og len deg tilbake i hvilestillingen.
2. Lås ryggen ved å trekke ryggrorene forover til ryggen låses med et klikk.

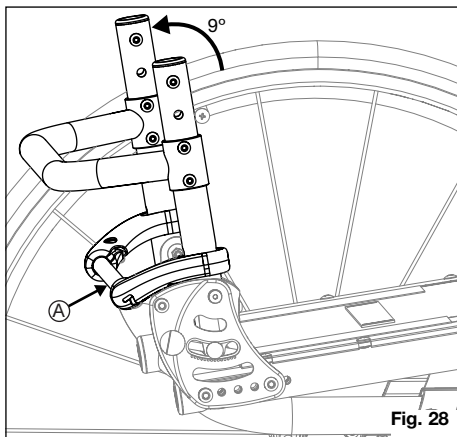


Fig. 28

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Ikke løft rullestolen etter utløserstaket (fig. 27:A, 28:A). Å løfte rullestolen etter utløserstaket kan føre til at deler svikter, noe som kan føre til et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.



Ikke sitt i eller kjør stolen hvis ryggstøtten ikke er låst. Å gjøre det kan føre til et fall som fører til alvorlig personskade eller dødsfall.

T. Stokk- og krykkeholder

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Fjern og fest bestandig alle artikler som er midlertidig festet til stolen når den brukes i et motorkjøretøy. Hvis lar artikler sitte på og ikke lagrer dem sikkert og separat i et motorkjøretøy, kan det føre til at disse artiklene blir farlige prosjektiler hvis kjøretøyet plutselig endrer hastighet eller retning. Fest dessuten stokker eller krykker på en forsvarlig måte mens du kjører rullestolen. Disse artiklene kan komme inn i rullestolen og føre til fall eller velt. Hvis du faller ut eller rullestolen velter, kan det føre til skade på stolen, alvorlig personskade eller dødsfall.

Slik bruker du stokk- eller krykkehold-eren

1. Plasser den smale enden av stokken eller krykken i den nedre festekoppen (fig. 29:A).
2. Bruk borrelåsfestet (fig. 29:B) til å sikre stokken eller krykken til den øvre ryggstolpen. Kontroller at stokker eller krykker vil holde seg sikker på plass,

både vertikalt og horisontalt, mens rullestolen er i bevegelse.

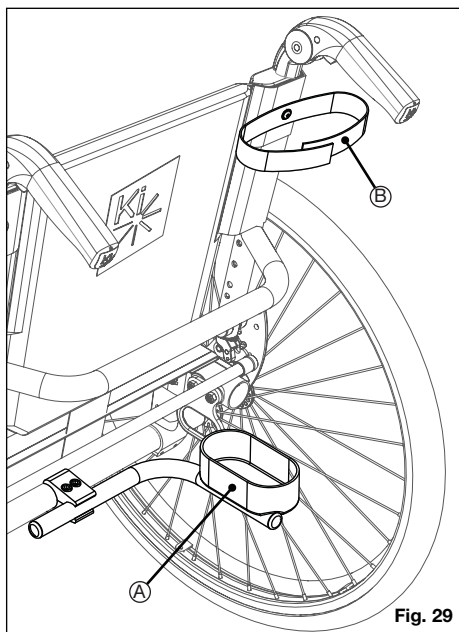


Fig. 29

U. Trinnrør

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Sørg for at passasjerens sitter sikkert i stolen før du går inn på trinnrøret. En passasjer som ikke sitter sikkert mens trinnrøret brukes, kan falle ned og føre til alvorlig skade eller død.

MERK: Trinnrørbrakettene varierer avhengig av akselplaten. Beslagene for å feste trinnrøret til braketten forblir de samme. På bildet nedenfor er braketten tatt av akselplaten for kun å vise hullene for montering av trinnrøret.

Hvordan installere trinnrøret (Fig. 30)

1. Skru trinnrørmottakeren inn i den ytre festeklemmen med en 4 mm unbrakonøkkel (fig. 30:A)
2. Fest klemmen til det nedre rammerøret på brukerens ønskede side med en 5 mm unbrakonøkkel (fig. 30:B).
3. Skyv trinnrøret inn i trinnrørmottakeren og fest det med skruer, skive og mutter i brukerens ønskede høyde ved hjelp av en 4 mm unbrakonøkkel og en 10 mm fastnøkkel (fig. 30:C/D).

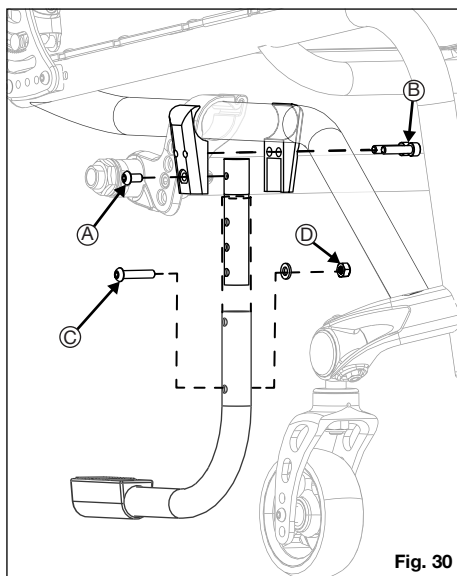


Fig. 30

⚠ ADVARSEL ⚠

ADVARSEL: Håndtering av rullestoloverflater som har høye temperaturer, kan føre til en potensielt farlig situasjon, som, hvis den ikke unngås, kan føre til personskade.



Stolen og delene i den må ikke utsettes for ekstrem kulde. Ekstremt kalde metalloverflater kan føre til at huden fryser fast i overflaten, og kan føre til skade på huden.

Vær oppmerksom på at langvarig eksponering mot direkte sollys eller andre kilder for strålevarme kan øke temperaturen på rullestolens overflater til mer enn de anbefalte grensene som standardene estimerer.

Pleiepersonell bør vurdere pasienter for skader på huden fra kontaktflater, slik som rødhet, hevelse, økende irritasjon, allergi, immunrespons eller andre reaksjoner.

VEDLIKEHOLD OG PLEIE

A. Tabell vedlikehold

Jevnlig og rutinemessig vedlikehold vil forlenge rullestolens levetid og forbedre dens ytelse. Reparasjon av rullestolen, skifte av deler og alle vedlikeholdskontroller som du ikke er komfortabel med å utføre, bør gjøres av en autorisert leverandør. Bruk kun deler som er godkjent av Ki Mobility når du skifter komponenter. Kontakt din lokale selger (det finnes et forhandlersøk på Ki Mobility sin nettside) for informasjon om deler, identifikasjon, bestilling og ytterligere

teknisk informasjon eller instruksjon. De fleste komponentene er illustrert i «KI Parts» på Ki Mobilitys-nettsted.

Vanlige verktøy for å utføre brukergodkjent vedlikehold inkluderer: Dekktrykkmåler, Metriske fastnøkler med åpen ende og Metriske unbra-konøkler.

ADVARSEL

ADVARSEL: Mangel på vedlikehold kan føre til uønskede hendelser, inkludert tap av

støtte eller kontroll som kan føre til alvorlig skade eller død.



Hvis du er i tvil om rullestolen fortsatt er trygg å bruke, eller hvis noen av delene svikter eller ser ut til å være i ferd med å svikte, må du slutte å bruke den umiddelbart og kontakte din autoriserte representant.

VÆR FORSIKTIG

VÆR FORSIKTIG: Ikke bruk oljebaserte løsemidler, avfettingsmidler eller vannfjerningsmidler (inkludert, men ikke begrenset til bilvaskemidler, alkohol eller WD-40). Det kan føre til skader på komponenter, lager eller overflater.

Kontroller	Slutt å bruke og kontakt autorisert leverandør	Ukentlig	Månedlig	Årlig
Kontroller lufttrykket i dekkene og etterfyll luft ved behov. Riktig lufttrykk finner du på dekket.		X		
Sjekk hjullåsinnkobl-ingen og -utkobling-en. Endringer i dekk-enes lufttrykk og dekkslitasje vil kreve at hjullåsene justeres. Instruksjoner for justering av hjullåsene finner du i avsnittet om Hjullåser i denne håndboken.		X		
Kontroller akselhyls-ene for å sikre at mutterne på aksehyl-sene sitter godt.		X		
Kontroller at hurtigkoblingsakslene kobles til og fra på riktig måte.		X		
Kontroller at svinghjulene, tipsikrings-hjulene og drivhjulene spinner fritt. Rengj-øring eller reservedeler kan være nødv-endig hvis det er noen problemer.		X		
Rengjør området rundt svinghjulhusene og -lagrene. Dette er et vanlig sted for opphoping av hår.		X		
Slik rengjør du stolen. I tilfelle det soles syrer eller du eksponeres for biologisk farlig materiale, fjern forure-nsningen umidd-elbart. Se avsnittet Rengjøring i denne håndboken for instruksjoner.		X		
Kontroller om drivhjulene, tipsikr-ingshjulene og sving-hjulene har slitte punkter eller skader. Skift umiddelbart om det er nødvendig.		X		
Kontroller drivringene for å sikre at de sitter godt og ikke er skadet.	X	X		
Sjekk drivringfestene for å sikre at de er strammet og sikret. Sjekk at drivringene ikke er skadet.		X		
Kontroller at kjøreh-åndtakene ikke roter-er eller kan dras av. Skift om nødvendig.		X		
Kontroller om festestykkene for armlener er for løse eller det er mangl-ende festemidler og kontroller at de er sikre, riktig justert og holder posisjonen.		X		
Kontroller at tipsikr-ingene er på linje og fungerer.		X		

Kontroller	Slutt å bruke og kontakt autorisert leverandør	Ukentlig	Månedlig	Årlig
Inspiser rammen(e) og tipsikringene. Se etter deformasjon, defekter, sprekker, bulker eller bøyer. Dette kan være tegn på materialtretthet i rullestolen, noe som kan føre til en svikt. Hold øyeblikkelig opp å bruke rullestolen og kontakt en autorisert leverandør.			X	
Kontroller om pols-tringen har tegn på slitasje, frynser eller hull. Skift polstringen umiddelbart om nød-vendig.	X		X	
Kontroller om arm-lener, puter og rygg-dekning har skader, rifter eller flenger.			X	
Kontroller hjulene vis-uelt og fysisk for løse, ødelagte eller bøyde eiker. Disse sympt-omene kan tyde på feil eikestramming.			X	
Kontroller at alle festemidler sitter godt. Med mindre annet er sagt, skal festemidler strammes til 4,5 N*m (40 tomme-pund).	X		X	
Verifiser at rullestolen ruller lett og rett.			X	
Kontroller at hjulet er rett ved å inspisere hjulet visuelt under rotasjon for å se etter uvanlige bevegelser, inkludert, men ikke begrenset til, vingling, hopp og/eller uregel-messige bevegelser. Hvis du mistenker at hjulene dine ikke er riktige, må du kontak-te din autoriserte for-handler eller en lokal sykkelreparatør.	X			X
Få rullestolen kontrol-tert og justert av en kvalifisert tekniker hos din autoriserte leverandør.				X

Trykkkonverteringstabellen

kPa	psi	kPa	psi
		138	20
10000	140	207	30
900	120	276	40
800	100	345	50
700	100	414	60
600	80	483	70
500	80	552	80
400	60	621	90
300	40	689	100
200	30	758	110
100	20	827	120
	14	896	130
		965	140
		1034	150

B. Rengjøring



VÆR FORSIKTIG

VÆR FORSIKTIG: Vask av tøydekte komponenter som inneholder flammehemmere, som vist på merkingen av polstringen, kan redus-

ere virkningen av flammehemmere over tid. Dette kan øke faren for antenning når de utsettes for åpen flamme eller andre tennkilder, noe som kan øke faren for personskade.

Aksler, hjul, dekk og bevegelige deler:

1. Rengjør rundt akslene og hjulene ukentlig med en fuktig klut.
2. Hår og lo vil feste seg i og rundt svinghjulhuset og drivhjulakslingene. Fjern med en stiv børste eller en syl. Pass på at du ikke skader lagertetningene.

Malte overflater

1. Håndvask med en klut og mildt vaske-middel.
2. Tørk med en ren klut eller la rullestolen lufttørke.
3. Ikke-slipende voks kan brukes for å bidra til å bevare malte overflater.

Polstring:

1. Håndvask med en klut og mildt vaske-middel.
2. La polstringen lufttørke. MÅ IKKE tørkes i tørketrommel.

Plastdeler

1. Håndvask med en klut og mildt vaske-middel.
2. Ikke bruk løsemidler eller aggressive rengjøringsmidler, siden de kan ødelegge plastdelene.

Desinfisering

1. Desinfiser overflaten med kommersielle desinfiseringsmidler med minst 70 % alkohol eller våtservietter. Skal ikke legges i bløt. Ikke la rengjøringsmidler få danne dammer.
2. La desinfiseringsmiddelet ligge på overflaten i minst 15 minutter og fjern med en aseptisk klut.

C. Oppbevaring

1. Når den ikke er i bruk, oppbevar stolen på et rent og tørt sted. Ellers kan stolen begynne å ruste og/eller korrodere.
2. Hvis stolen har vært lagret i mer enn to måneder, må den få service og inspiseres av en autorisert leverandør før bruk.

D. Kassering

Spesielle regler for avfallshåndtering eller resirkulering kan gjelde lokalt, og disse må det tas hensyn til når en kassering blir vurdert. Dette kan inkludere at rullestolen skal rengjøres eller dekontamineres før kassering.

Hvis det er et krav om resirkulering av materialer, se følgende generelle liste over materialene som brukes i rullestolens deler:

- Aluminium – rammen, svinghjulgauffel, svinghjulfeste, lagerhus, camber-rørehet, ryggstøttens festeplater, ryggstøtteramme, ryggstøttens frigjøringsstang, kjørehåndtak, fotstøtterør, fotplate, seteskinner, drivring og hjulfelg.

- Stål – festemidler, QR-aksler, svinghjulaksler, ryggstøttens frigjøringshendel, eiker, lager og akselhylse.
- Plast – drivhjul, svinghjuldekk, kjørehåndtakgrep, armleneputer og rørplugger.
- Polstring – vevet polyestertøy og polyuretanskum.

Hvis resirkulering av materialer er ønsket eller kreves, slik som WEEE-direktivet (2012/19/EU) i Europa for elektrisk og elektronisk avfall, er både REAC og Mascot i henhold til WEEE og gir veiledning om resirkulering og avfallshåndtering. Riktig demontering er nødvendig for å oppnå en høy andel av gjenbruk eller resirkulering. Det er nødvendig å være nøye med å bruke riktige verktøy og beskyttelsestiltak for håndteringen for å unngå kontakt med skarpe kanter.

Plast som er markert med resirkuleringssymboler og termoplastdeler kan resirkuleres. Deler i aluminium, kopper og stål, inkludert festemidler, kan resirkuleres. Kabler, batterier og kretskort skal avhendes for seg ifølge lokale krav. Returner stolen og tilbehøret til din autoriserte leverandør for riktig kassering hvis du ikke er komfortabel med eller i stand til å avhende rullestolen på riktig måte.

FEILSØKING

A. Symptomer og løsninger

For optimal ytelse må rullestolen din justeres av og til. Her følger en liste over mulige symptomer som du kan støte på i rullestolens levetid, og forslag til løsninger for hvert symptom. For de beste feilsøkingresultatene bør du prøve én løsning om gangen før du går videre til en annen løsning. Hvis symptomene ikke blir borte eller du ikke er trygg på hvordan løsningen skal utføres, anbefales det at du tar med rullestolen til et autorisert servicesenter for reparasjon.

Løsninger:

- A. Korriger dette selv hvis du kan, eller kontakt en autorisert distributør
- B. Kontakt en autorisert distributør

		Symptomer						
		Stolen trekker til én side	Rullestolen er «løs»	Vansker med å svinge	Svinghjulet «flyter»	Svinghjulet «bla-frer»	Hvining, klikking eller skrangling	Slingring
A	Kontroller at alle dekktrykk er riktige og like.	X				X		
A	Kontroller at alle festemidler er riktig strammet, stram til om nødvendig.	X		X	X			

		Symptomer						
		Stolen trekker til én side	Rullestolen er «løs»	Vansker med å svinge	Svinghjulet «flyter»	Svinghjulet «bla-frer»	Hvining, klikking eller skrangling	Slingring
B	Stram eikene (hvis de finnes).	X	X			X		
A	Kontroller for å sikre at svinghjulene berører bakken og ikke «flyter».						X	
B	Optimalisere innstillingen av tyngdepunktet							X
A	Se etter konflikter rundt drivhjulene og svinghjulene.	X						
A	Smør med teflonbasert smøremiddel mellom rammetilkoblingene og motstøtende deler i mistenkte områder	X	X					
A	Fjern rusk rundt svinghjulene/lagre ne.							

GARANTI

Ki Mobility garanterer rammen og hurtigkoblingssakslene på denne rullestolen mot feil i materialer og fagmessig utførelse i den opprinnelige kjøperens levetid. Alle andre deler og komponenter produsert av Ki Mobility i denne rullestolen er garantert mot feil i materialer og fagmessig utførelse i ett år fra datoen for første forbrukerkjøp.

Forventet levetid på rammen er fem år.

Begrensninger i garantien

- Vi garanterer ikke:
 - Slitedeler: Polstring, dekk, armleneputer, rør, armlener og kjørehåndtak-grep.
 - Skade som følge av vanskjøtsel, feil bruk eller feilaktig installasjon eller reparasjon.
 - Skade fra at vektgrensen er overskredet.
- Denne garantien er UGYLDIG hvis det opprinnelige serienummermerket på stolen er fjernet eller endret.
- Denne garantien er UGYLDIG hvis den opprinnelige stolen har blitt modifisert fra sin opprinnelige tilstand og det fastslås at endringen førte til svikt.

- Denne garantien er kun gyldig i Nord Amerika. Kontakt leverandøren din for å finne ut om internasjonale garantier gjelder.

Ki Mobilitys ansvar

Ki Mobilitys eneste ansvar er å bytte eller reparere, slik vi selv avgjør, de delene som dekkes. Det finnes ingen andre vederlag, uttrykkelige eller indirekte uttrykt.

Ditt ansvar

- Varsle Ki Mobility, gjennom en autorisert leverandør, før garantiperioden utløper og få et returnnummer (return authorization, RA) for å returnere eller reparere de delene som dekkes.
- Få leverandøren til å sende den autoriserte returen, med forhåndsbetalt frakt, til:

Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
- Betal alle arbeidskostnader for å reparere eller montere deler.

SPESIFIKASJONER

Produsent: Ki Mobility, LLC	Maksimal beboermasse: 136 kg (300 pund)
Adresse: 5201 Woodward Dr., Stevens Point, WI 54481	Beboermassegruppe (I, II or III): III
Modell: Rogue DT	

Informasjon om opplysninger (ISO)

Standardreferanse	Måling	Fast eller minimumsverdi	Maksimumsverdi, om relevant	Standardreferanse	Måling	Dim. Nr.	Fast eller minimumsverdi	Maksimumsverdi, om relevant
ISO 7176-5 8.2	Total lengde med benstøtte (Std eller SRC)	838 mm 33 in	- mm - in	ISO 7176-1 11	Hindret tipsikringen stolen i å velte over?			Ja
ISO 7176-5 8.2	Total lengde med benstøtte (MDC/MAC)	N/A mm N/A in	- mm - in	ISO 7176-3 7.2	Maks helling oppover/ nedoverbakke	N/A	20.1°	- °
ISO 7176-5 8.3	Total bredde	673 mm 26.50 in	- mm - in	ISO 7176-3 6b	Bremsens betjeningskraft	N/A	53 N 12.00 lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.4	Håndtakshøyde (SRC/MDC)	1029 mm 42.00 in	- mm - in	ISO 7176-30 5.10	Spakens betjeningskraft (vippe/lene bakover)	N/A	N/A N N/A lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.5	Foldet lengde (SRC/MDC)	812 mm 32 in	- mm - in	ISO 7176-30 8	Justeringskraft for tilbakelemt rygg	N/A	N/A N N/A lb	- N - lb
ISO 7176-5 8.6	Foldet bredde (SRC/MDC)	673 mm 26.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.2	Setevinkel	(1)	3.8°	- °
ISO 7176-5 8.7	Foldet høyde (SRC/MDC)	660 mm 26.00 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.3	Effektiv setedybde	(2)	432 mm 17.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.8	Stigende	25 mm 1 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.5	Effektiv setebredde	(4)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.9	Total Masse	13.6 kg 30lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.6	Seteoverflaten høyde foran	(5)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.10	Masse av den tyngste delen	8.8 kg 19.5 lb	- kg - lb	ISO 7176-7 7.3.7	Ryggstøttevinkel	(6)	10°	- °
ISO 7176-5 8.13	Svingradius (SRC/MDC)	660 mm 26 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.8	Høyde på ryggstøtte	(7)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.15	Nødvendig bredde på vinklet korridor (SRC/MDC)	787 mm 31 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.12	Fotstøtte til sete-avstand	(11)	432 mm 17.0 in	- mm - in
ISO 7176-5 8.16	Nødvendig inngangsdybde for døråpning (SRC/MDC)	922 mm 36 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.16	Ben til seteoverflatevinkel	(15)	110°	- °
ISO 7176-5 8.17	Nødvendig korridorbredder for sideåpning (SRC/MDC)	800 mm 31.5 in	- mm - in	ISO 7176-7 7.3.17	Avstand mellom armene og sete	(16)	254 mm 10.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 8	Statisk stabilitet i nedoverbakke	20°	20.1°	ISO 7176-7 7.3.18	Avstand mellom armene foran og ryggstøtte	(17)	356 mm 14.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 9	Statisk stabilitet oppoverbakke	6.5°	18.1°	ISO 7176-7 7.3.23	Forreste plassering av armlenestrukturen	(22)	432 mm 17.0 in	- mm - in

Informasjon om opplysninger (ISO)

Standardreferanse	Måling	Fast eller minimumsverdi	Maksimumsverdi, om relevant	Standardreferanse	Måling	Dim. Nr.	Fast eller minimumsverdi	Maksimumsverdi, om relevant
ISO 7176-1 10	Statisk stabilitet sidelengs	11.7	17°	ISO 7176-7 7.3.24	Diameter på håndkant	(23)	508 mm 20.0 in	- mm - in
ISO 7176-1 11	Statisk stabilitet med tippsikring	4.3°	14°	ISO 7176-7 7.3.26	Horizontal plassering av aksel	(25)	76 mm 3.0 in	- mm - in

Denne rullestolen er i samsvar med følgende standarder:						Ja	Nei	N/A
a. Krav og testmetoder for statisk, støt- og utmattelsesstyrke (ISO 7176-8 og ISO 717-30 etter som de passer)						X		
b. Krav til motstand mot antenning i henhold til ISO 7176-16						X		

Se avsnittet Generelle advarsler i håndboken for mer informasjon om brennbarhet.



+1 715-254-0991
Ki Mobility, LLC
5201 Woodward Drive
Stevens Point, WI 54481
U.S.A.



Autoriserte EU-representant



Etac Supply Center AB
Långgatan 12
334 33 Anderstorp
Sweden



www.kimobility.com

